

# boso medicus system



**Gebrauchs-  
anweisung**

DE 2

**User  
Instructions**

GB 46

**Mode  
d'emploi**

FR 90

**Manuale  
di istruzioni**

IT 134

**Manual  
del Usuario**

ES 178

# Inhaltsverzeichnis

Geräteübersicht.....	4
Lieferumfang.....	5
 Kurzanleitung.....	6
Einführung.....	7
Zweckbestimmung.....	8
Blutdruckwerte.....	9
Systolischer und diastolischer Blutdruckwert.....	9
Grenzwerte der WHO für die Beurteilung der Blutdruckwerte.....	9
Inbetriebnahme des Gerätes.....	11
Batterien einsetzen.....	11
Batterie-Statusanzeige.....	12
Allgemeine Hinweise zur Selbstmessung des Blutdrucks.....	13
Allgemeine Hinweise zur Bluetooth-Verbindung.....	15
Vorbereitung zur Blutdruckmessung.....	17
Hinweis zur Manschettengröße.....	17
Anlegen der Manschette.....	18

# Inhaltsverzeichnis

Blutdruckmessung.....	21
Abbruch der Messung.....	22
Messwertanzeige.....	23
App einrichten und Verbindung herstellen .....	25
Blutdruck messen und übertragen .....	29
Messungen auswerten und versenden .....	31
Messwerte löschen .....	33
Netzbetrieb .....	34
Fehleranzeige.....	35
Reinigung und Desinfektion .....	38
Garantiebedingungen .....	39
Kundendienst / Entsorgung.....	40
Technische Daten.....	41
Prüfanweisung für die messtechnische Kontrolle (nur für geschultes Fachpersonal) .....	44



# Geräteübersicht

DE



Statusanzeige für Batterien

siehe Seite 12



Messung läuft

siehe Seite 22



Herzrhythmus-Störung während der Messung

siehe Seite 23, 36



**ACHTUNG!** Kunststoffbeutel können gefährlich sein.  
Um Erstickungsgefahr zu vermeiden bitte diesen  
Beutel von Babies und Kindern fernhalten.

siehe Beutel



Bluetooth Kommunikation aktiv

# Lieferumfang

1 Blutdruckmessgerät  
**boso medicus system**



4 Batterien LR 6 (AA)



1 Universalmanschette  
CA 04



1 Gebrauchsanweisung



1 Etui



## Kurzanleitung

- ➔ Batterien einlegen, auf richtige Polung achten (S. 11)
- ➔ Manschette mit Messgerät verbinden (S. 17)
- ➔ Manschette anlegen (S. 18)
- ➔ Start (und Abbruch) einer Messung durch Betätigung der START-Taste. (S. 21)

Messwerte Systole, Diastole und Puls werden nach Ablauf der Messung angezeigt (S. 23)



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die in der Gebrauchsanweisung enthaltenen detaillierten Informationen zu Handhabung und Sicherheit Ihres Blutdruckmessgerätes.



Bitte lesen Sie daher unbedingt die Gebrauchsanweisung!

## Einführung

Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns sehr, dass Sie sich zum Kauf eines boso-Blutdruckmessgerätes entschieden haben. Die Marke boso steht für höchste Qualität und Präzision und ist auch bei den Profis die Nummer 1: Aktuell arbeiten 96% aller deutschen Ärzte mit boso-Blutdruckmessgeräten. Die jahrzehntelange Erfahrung aus dem Profi-Bereich steckt auch in allen Patientengeräten für die Selbstmessung zu Hause.

Dieses Gerät hat unsere strenge Qualitätskontrolle durchlaufen und ist Ihr sicherer Partner für die Kontrolle Ihrer Blutdruckwerte.



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der erstmaligen Anwendung sorgfältig durch, denn eine korrekte Blutdruckmessung ist nur bei richtiger Handhabung des Geräts möglich.

In dieser Gebrauchsanweisung wird „➔“ für eine Aktion des Anwenders verwendet.

Um Hilfe bei der Inbetriebnahme, Benutzung oder Wartung zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandel oder an den Hersteller (Kontakt Daten auf der hinteren Umschlagseite dieser Gebrauchsanweisung).

Ein unerwarteter Betriebszustand oder ein Vorkommnis welches den gesundheitlichen Zustand verschlechtert hat oder hätte verschlechtern können ist dem Hersteller unverzüglich zu melden.

Bei Veräusserung des Gerätes ist diese Gebrauchsanweisung beizulegen.



# Einführung

DE

Bei Verwendung des Gerätes in der Heilkunde (gemäß Medizinprodukte-Betreiberverordnung) sind Messtechnische Kontrollen in regelmäßigen Abständen durchzuführen (siehe Seite 44).

Drahtlose Kommunikationsgeräte, wie z.B. drahtlose Heimnetzwerk-Geräte, schnurlose Telefone und deren Basisstationen, Walkie-Talkies können dieses Blutdruckmessgerät beeinflussen. Daher sollte zu solchen Geräten ein Abstand von mindestens 3,3 Meter gehalten werden. Während der Blutdruckmessung nicht mit einem Handy telefonieren.

Dieses Gerät entspricht der europäischen Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG. Dies wird durch die CE-Kennzeichnung

CE 0124 bestätigt. (Die Kennnummer 0124 steht für die benannte Stelle DEKRA)

Die Bluetooth-Funkübertragung des Gerätes entspricht der Telekommunikations-Richtlinie 1999/5/EG.

## Zweckbestimmung

Nichtinvasive Erfassung des systolischen und diastolischen Blutdruckwertes sowie der Pulsfrequenz von Personen.

Das Gerät kann mit jedem Armumfang wie auf der zugehörigen Manschette angegeben verwendet werden.

# Blutdruckwerte

Um den Blutdruck zu ermitteln, müssen **zwei Werte** gemessen werden:

- **Systolischer (oberer) Blutdruckwert:** Er entsteht, wenn der Herzmuskel sich zusammenzieht und das Blut in die Blutgefäße gedrückt wird.

- **Diastolischer (unterer) Blutdruckwert:** Er liegt vor, wenn der Herzmuskel gedehnt ist und sich wieder mit Blut füllt.

Die Messwerte des Blutdruckes werden in mmHg (mm Quecksilbersäule) angegeben.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat folgende Grenzwerte für die Beurteilung der Blutdruckwerte festgelegt:

	systolisch	diastolisch
Eindeutig erhöhter Blutdruck (Hypertonie)	ab 140 mmHg	ab 90 mmHg
Noch normaler Blutdruck	130 bis 139 mmHg	85 bis 89 mmHg
Normaler Blutdruck	120 bis 129 mmHg	80 bis 84 mmHg
Optimaler Blutdruck	bis 119 mmHg	bis 79 mmHg

## Blutdruckwerte

DE

Wann eine medikamentöse Therapie erforderlich ist, hängt nicht allein vom Blutdruck ab, sondern auch vom Risikoprofil des Patienten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn nur einer der beiden Werte (Systole, Diastole) ständig über den Grenzwerten für eindeutig erhöhten Blutdruck liegt.

Bei der Blutdruck-Selbstmessung zu Hause werden häufig etwas niedrigere Werte als beim Arzt gemessen. Deshalb hat die Deutsche Hochdruckliga für die Messung zu Hause tiefere Grenzwerte festgelegt:

Messung zu Hause: 135/85 mmHg

Messung in der Arztpraxis: 140/90 mmHg

## Inbetriebnahme des Gerätes

Das Gerät muss gemäß den Informationen in dieser Gebrauchsanweisung installiert und in Betrieb genommen werden.

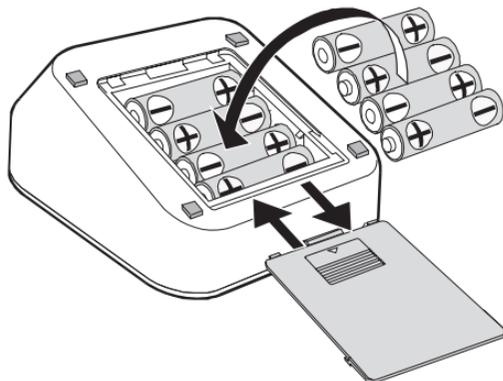


Bild 1

➔ Verwenden Sie ausschließlich hochwertige, auslaufsichere Batterien der angegebenen Spezifikation (siehe „Technische Daten“ S. 41).

⚠ Mischen Sie **nie** alte und neue Batterien oder verschiedene Fabrikate.

⚠ Bei falscher Polung funktioniert das Gerät nicht und es kann zu Wärmebildung oder Auslaufen der Batterien und zur Zerstörung des Gerätes kommen.

DE

### ➔ Batterien einsetzen

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Gerätes. Setzen Sie die Batterien entsprechend Bild 1 im Batteriefach ein.

➔ Wird das Gerät längere Zeit gelagert, die Batterien herausnehmen.

## Inbetriebnahme des Gerätes

Das Gerät besitzt eine Statusanzeige für den Batterieladezustand (siehe S. 4)

DE

-  Batterie voll geladen.
-  Batterie teilweise entladen.
-  Batterie demnächst ersetzen.
-  blinkend! Keine weitere Messung möglich.  
Batterie ersetzen.

 **Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz**

Verbrauchte Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Sie können diese bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgeben. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde.

# Allgemeine Hinweise zur Selbstmessung des Blutdruckes

1. Blutdruckschwankungen sind normal. Selbst bei einer Wiederholungsmessung können beachtliche Unterschiede auftreten. Einmalige oder unregelmäßige Messungen liefern keine zuverlässige Aussage über den tatsächlichen Blutdruck. Eine zuverlässige Beurteilung ist nur möglich, wenn Sie regelmäßig unter vergleichbaren Bedingungen messen und die Messwerte im Blutdruckpass aufschreiben.
2.  Selbstmessung bedeutet noch keine Therapie. Verändern Sie auf **keinen** Fall von sich aus die vom Arzt vorgeschriebene Dosierung der Arzneimittel.
3. Herzrhythmus-Störungen können die Messgenauigkeit des Gerätes beeinträchtigen, bzw. zu Fehlmessungen führen (siehe Seite 36).
4. Bei Patienten mit schwachem Puls (möglich z.B. bei Trägern von Herzschrittmachern) kann es zu Fehlmessungen kommen. Das Blutdruckmessgerät hat keinen Einfluss auf den Herzschrittmacher.
5. Schwangere befragen Ihren Arzt vor der Verwendung des Gerätes.
6. Die Messung muss immer im Ruhezustand vorgenommen werden. Es empfiehlt sich, den Blutdruck zweimal täglich zu kontrollieren – morgens nach dem Aufstehen und abends, wenn Sie sich nach der Arbeit entspannt haben.

## Allgemeine Hinweise zur Selbstmessung des Blutdruckes

---

7. Der Blutdruck muss (wenn keine Einschränkungen (siehe Seite 19) vorliegen) immer an dem Arm mit den höheren Druckwerten gemessen werden. Hierzu messen Sie den Blutdruck zuerst an beiden Armen und danach immer an dem Arm dessen Blutdruckwert höher ist.

A small grey square icon containing the letters 'DE' in white, enclosed in a white circle.

## Allgemeine Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

-  Das Blutdruckmessgerät darf nicht an Orten verwenden, an denen drahtlose Kommunikation verboten ist, wie z.B. in Flugzeugen oder Krankenhäusern. Dieses Blutdruckmessgerät kann ungünstige Auswirkungen auf elektronische Geräte oder medizinische elektrische Geräte haben.
- Die maximale Kommunikationsentfernung zwischen Blutdruckmessgerät und Empfänger beträgt ca. 10 Meter. Dieser Abstand kann sich aufgrund der Umgebung verringern; prüfen Sie daher, ob die Entfernung für die Übertragung von Daten nach der Messung gering genug ist.
- Sorgen Sie dafür, dass der Raum zwischen dem Blutdruckmessgerät und dem Mobilgerät unverbaut ist. Die Kommunikationsentfernung kann durch die Bauausführung des Gebäudes oder sonstige Hindernisse verkürzt sein. Insbesondere ist eine Kommunikation durch Stahlbetonwände usw. unter Umständen nicht möglich.
- Während der Kopplung muss auf allen anderen in Reichweite befindlichen Geräten Bluetooth deaktiviert sein
- Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass dieses Blutdruckmessgerät andere drahtlose Kommunikationsgeräte

# Allgemeine Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

---

stört, verwenden Sie das Blutdruckmessgerät an einem anderen Standort.

DE

- Verwenden Sie die Bluetooth-Verbindung nicht in der Nähe eines IEEE802.11g/b/n-WLAN-Geräts oder sonstiger drahtloser Kommunikationsanlagen (insbesondere im Bereich von 2,4 GHz) bzw. in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische Wellen aussenden (wie z.B. Mikrowellengeräten). Dies kann dazu führen, dass die Verbindung häufig unterbrochen wird, die Kommunikationsgeschwindigkeit deutlich abnimmt und Fehler auftreten.

# Vorbereitung zur Blutdruckmessung

## Hinweis zur Manschettengröße:

**!** Das Gerät darf nur mit folgenden Manschetten verwendet werden. Diese müssen entsprechend dem aufgedruckten Oberarm-Umfang gewählt werden.

Typ	Armumfang	Bestellnummer
CA01	22 – 32 cm	143-4-764
CA02	32 – 48 cm	143-4-757
CA04	22 – 42 cm	143-4-765*

\* Universalmanschette im Standardlieferumfang enthalten.

Verbinden Sie die Manschette mit dem Gerät, indem Sie den Stecker (einrastend) in die Buchse auf der linken Seite des Gerätes eindrücken. (Siehe Bild 2).

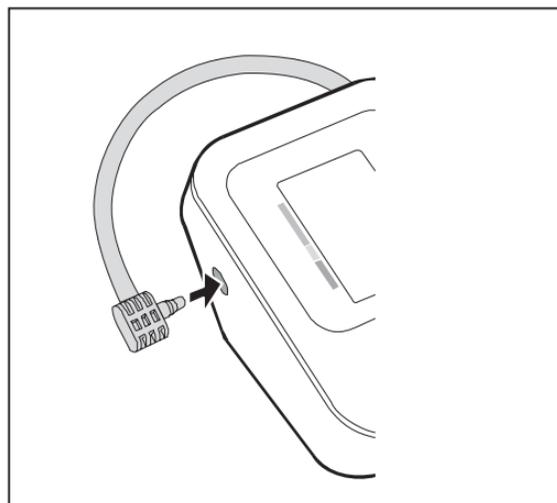


Bild 2

# Vorbereitung zur Blutdruckmessung

Folgendes muss bei der Blutdruckmessung beachtet werden:

DE



Meiden Sie eine Stunde vor der Blutdruckmessung Nikotin und Kaffee.



Sitzen Sie zur Blutdruckmessung bequem. Lehnen Sie Rücken und Arme an. Kreuzen Sie die Beine nicht. Stellen Sie die Füße flach auf den Boden.

Entspannen Sie sich 5 Minuten und messen Sie erst dann.

Bewegen Sie sich nicht während der Messung.

## Anlegen der Manschette

Die Messung ist am unbedeckten Oberarm durchzuführen.



Achten Sie darauf, dass der Arm bei eng anliegender Oberbekleidung durch das Hochkrempeln des Ärmels nicht abgeschnürt wird (gegebenenfalls das Kleidungsstück vor dem Messen ablegen).

➔ Streifen Sie die zu einem Ring geöffnete Manschette über den Oberarm bis der untere Manschettenrand ca. 2-3cm oberhalb der Armbeuge liegt. Die Manschette muss so platziert werden, dass die Markierung auf der Arterie liegt (siehe Bild 3).

# Vorbereitung zur Blutdruckmessung

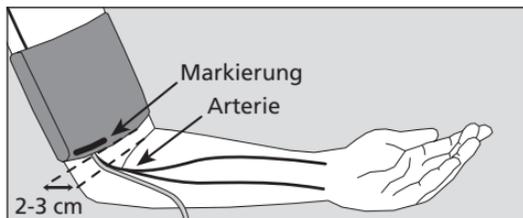


Bild 3

⚠ Die Manschette darf nicht über Wunden angelegt werden, da dies zu weiteren Verletzungen führen kann.

⚠ Achten Sie darauf, dass die Manschette nicht an einem Arm angelegt wird, dessen Arterien oder Venen in medizinischer Behandlung sind oder waren (z.B. Shunt).

⚠ Bei Frauen mit Brustamputation die Manschette nicht am Arm auf der amputierten Körperseite anlegen.

⚠ Während der Messung können Fehlfunktionen bei Medizingeräten auftreten, die zeitgleich am selben Arm verwendet werden.

⚠ Die Manschette darf nicht zu fest anliegen, es sollen noch etwa zwei Finger zwischen Arm und Manschette passen.

⚠ Der Metallbügel darf **niemals** über der Arterie liegen (siehe Bild 3) da sonst die Messwerte verfälscht werden könnten.

➔ Ziehen Sie das durch den Metallbügel geführte Manschettenende an und schlagen es nach außen um den Oberarm. Durch leichtes Andrücken haftet der Klettverschluss sicher.

# Vorbereitung zur Blutdruckmessung

➔ Legen Sie den Arm mit der angelegten Manschette entspannt und leicht abgewinkelt auf den Tisch, so dass sich die Manschette in Herzhöhe befindet.

DE

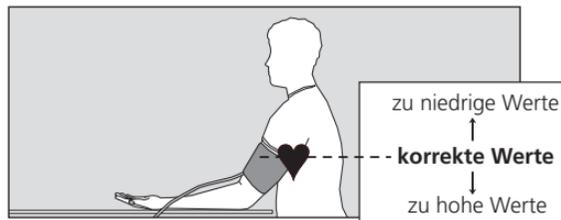


Bild 4



Während der Messung nicht sprechen.

**⚠** Achten Sie darauf, dass der Luftschlauch während der Messung nicht geknickt ist. Ein dadurch resultierender Blutstau könnte zu Verletzungen führen.

**⚠** Der Blutfluss darf durch die Blutdruckmessung nicht unnötig lange (> 2 Minuten) unterbunden werden. Bei einer Fehlfunktion des Gerätes nehmen Sie die Manschette vom Arm ab.

**⚠** Zu häufige Messungen können durch Beeinträchtigung des Blutflusses zu Verletzungen führen.

# Blutdruckmessung

- ➔ Starten Sie die Messung mit der START-Taste



- ⚠ Jetzt den Arm vollkommen ruhig halten und nicht sprechen.

Zur Funktionskontrolle erscheinen kurz sämtliche Anzeigeelemente der LCD-Anzeige (siehe Bild 5).

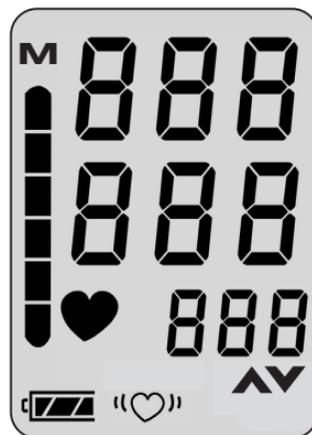


Bild 5



# Blutdruckmessung

Die Pumpe beginnt die Manschette aufzupumpen.

DE

Das Gerät besitzt eine intelligente Aufpump-Automatik für schonendes Aufpumpen auf den richtigen Manschettendruck. Der steigende Manschettendruck wird als digitaler Zahlenwert und in Form von Balken am linken Displayrand angezeigt.

Bei Erreichen des **erforderlichen Drucks** schaltet die Pumpe ab, und die Luft entweicht langsam aus der Manschette.

## **Abbruch der Messung:**

Eine Messung kann jederzeit abgebrochen werden, indem Sie während einer laufenden Messung die START-Taste drücken

wodurch die Manschette automatisch entlüftet wird.

Während der Messphase wird der fallende Manschettendruck und das blinkende  -Symbol angezeigt (siehe Bild 6).



Bild 6

# Messwertanzeige

Nach Ende der Messung öffnet sich automatisch das eingebaute Ventil zur Schnellentlüftung der Manschette.

Die gemessenen Blutdruckwerte (Systole, Diastole, Puls) der Messung werden angezeigt (siehe Bild 7).



Bild 7

Erscheint nach der Messung das Symbol "♥", wird eine Wiederholungsmessung empfohlen, dabei den Arm vollkommen ruhig halten. Die wiederholte Anzeige des Symbols "♥" bei ruhig gehaltenem Arm kann ein Hinweis auf Herz-Rhythmus-Störungen sein. Bitte besprechen Sie dies bei Ihrem nächsten Arztbesuch.

Der Blutdruck ist eine dynamische Größe und kann durch die Haltung des Patienten wie Sitzen, Stehen, Liegen, Bewegung vor oder während der Messung, körperliche Verfassung (Stress, Krankheit...) beeinflusst werden.

➔ Bei offensichtlich falschem Messergebnis die Messung wiederholen.

## Messwertanzeige

---

DE

Nach ca. 1 min. schaltet das Gerät automatisch ab. Um eine Wiederholungsmessung durchzuführen ist erneut die START-Taste **kurz** zu drücken.



Lassen Sie zwischen zwei Messungen mindestens zwei Minuten vergehen.

- ➔ Wird keine weitere Messung gewünscht, nehmen Sie die Manschette vom Arm ab.

## App einrichten und Verbindung herstellen



Erfordert Interaktion mit der boso-App



Erfordert Interaktion mit dem boso medicus system

Um den Datenaustausch zwischen dem Blutdruckmessgerät und Ihrem Mobilgerät zu ermöglichen, müssen folgende Schritte beachtet werden:



- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Mobilgerät Bluetooth aktiviert ist. (Voraussetzung ist die Verfügbarkeit von Bluetooth 4.0)

- Laden Sie die boso-App aus dem Google/Apple Store.



Bei der Installation der App wird systembedingt die Erlaubnis auf den Zugriff des aktuellen Standorts abgefragt. Diese Abfrage ist mit "JA" zu beantworten um Fehler bei der BT-Verbindung zu vermeiden.

# App einrichten und Verbindung herstellen



- Starten Sie die boso-App auf Ihrem Mobilgerät.
- Anlegen eines neuen Benutzers:
  1. Wählen Sie „Benutzer“ im Hauptmenü aus.
  2. Wählen Sie „+ Neu“ in der unteren Menüleiste aus.
  3. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein. Pflichtfelder sind mit „\*“ gekennzeichnet.
  4. Speichern Sie Ihre Eingabe über den Button „Speichern“ in der unteren Menüleiste.
- Markieren Sie den gewünschten Benutzer indem Sie einen Haken setzen, für den die Messwerte gespeichert werden sollen.



# App einrichten und Verbindung herstellen



- Gehen Sie über den Button „Zurück“ in der oberen Menüleiste zurück in das Hauptmenü.
- Öffnen Sie im Hauptmenü „Geräte“.



- Drücken und halten Sie am Blutdruckmessgerät die START-Taste so lange bis im Display „Pr“ erscheint. Die Kommunikationsanzeige wird für ca. eine Minute im Display angezeigt.



- Im Menü „Geräte“ wählen Sie „Neues Gerät hinzufügen“ in der unteren Menüleiste aus.



Bei iOS muss zusätzlich die Kopplungsanfrage durch „Koppeln“ bestätigt werden.



- Datum und Uhrzeit werden automatisch von dem Mobilgerät synchronisiert.



- Nach erfolgreicher Kopplung erscheint „End“ im Display des Gerätes und das Gerät wird in der Geräteliste der App angezeigt.

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Verlassen Sie nun das Menü über den Button „Zurück“ in der oberen Menüleiste.

## App einrichten und Verbindung herstellen

DE

**Nach einem Batteriewechsel** muss das Blutdruckmessgerät erneut mit dem Mobilgerät gekoppelt werden, da die Zeitinformation durch den Batteriewechsel gelöscht wird.

Ohne erneute Kopplung wird bei der Datenübertragung die aktuelle Systemzeit des Mobilgerätes als Zeitstempel für die Messwerte gespeichert.

Bitte gehen Sie hierbei wie folgt vor:

- Blutdruckmessgerät in der Geräteliste der App löschen
- Blutdruckmessgerät aus den Bluetooth-Einstellungen des Mobilgerätes löschen
- Neue Kopplung wie beschrieben durchführen.

## Blutdruck messen und übertragen

Legen Sie nun die Manschette an und führen Sie eine Blutdruckmessung durch wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.



Solange Bluetooth aktiv und die App geöffnet ist, werden die gemessenen Werte automatisch im Anschluss an die Blutdruckmessung übertragen.



Nach erfolgreicher Übertragung wird der Messwert aus dem Messwertspeicher des Blutdruckmessgerätes gelöscht.



Sollten die Messdaten nicht übertragen worden sein, führen Sie die Kopplung erneut durch. Bei inaktiver App bzw. inaktivem Bluetooth

werden bis zu 30 Messwerte automatisch im Blutdruckmessgerät gespeichert. Ist der Messwertspeicher voll, so wird die älteste Messung gelöscht und die aktuelle Messung gespeichert. Die Messwerte werden im Anschluss an die nächste Messung nach Aktivierung der App übertragen.

Um alle gespeicherten Messwerte die sich im Messwertspeicher des medicus system befinden in die App zu übertragen, muss im Menü „Einstellungen“ die Messwertübernahme aller Messwerte aktiviert sein (Standardeinstellung). Wird hier „letzter“ ausgewählt, so wird immer nur der zuletzt gemessene Messwert übertragen und alle

# Blutdruck messen und übertragen

gespeicherten Messwerte im Gerät gelöscht.

Im Menü „Einstellungen“ können auch die Zeiten für die Vormittag- / Nachmittag-Auswertung geändert werden.

Speichern Sie Ihre Einstellungen über den Button „Speichern“ in der unteren Menüleiste.

„bosogramm system“ ist für eine Waage vorgesehen.

The screenshot displays the 'Einstellungen' (Settings) menu. At the top, there is a 'Zurück' (Back) button and the 'bosogram' logo. The main content is divided into three sections:

- Allgemeine Einstellungen**: Includes 'Beginn Vormittag Auswertung' (00:00) and 'Beginn Nachmittag Auswertung' (12:00).
- bosomedicus system**: Includes 'Messwertübernahme' with two options: 'letzter' (selected) and 'alle'.
- bosogramm system**: Includes 'Modus' with two options: 'singleuser' and 'multiuser' (selected).

At the bottom, there is a navigation bar with 'Abbrechen' (Cancel) and 'Speichern' (Save) buttons.

# Messungen auswerten und versenden




Im Menü „Messwerte“ werden alle bisher übertragenen Messwerte angezeigt.

Über den Button „Grafiken“ in der unteren Menüleiste erreichen Sie die grafische Darstellung der Messwerte.

Die Auswahl der verfügbaren Grafiken „SYS/DIA“, „PULS“ erfolgt über die Buttons im oberen Bildschirmbereich. Durch Antippen der Grafik wird diese vergrößert bzw. verkleinert.

„kg/BMI“ ist für eine Waage vorgesehen.

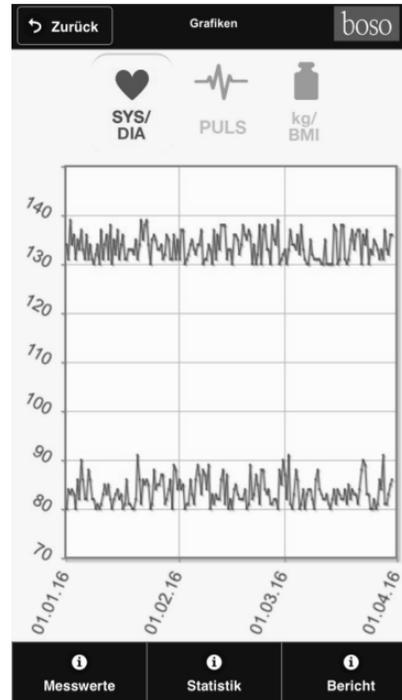

# Messungen auswerten und versenden



Über den Button „Statistik“ in der unteren Menüleiste erreichen Sie die statistische Zusammenfassung der Messwerte. Der Zeitbereich für die Zusammenfassung (Datum von/bis) kann ausgewählt werden.

Über den Button „Bericht“ in der unteren Menüleiste erreichen Sie das Menü für den Versand der Messwerte. Hier kann die Zusammenfassung im PDF- oder XML-Format per Email versendet werden.

Die XML-Datei kann im PC-Programm „boso profil-manager XD Home“ eingelesen werden.

Dieses Programm bietet weitere Auswertungsmöglichkeiten und ist im Internet (<http://www.boso.de/download/profilmanagerXDHome/>) kostenlos verfügbar.

→ Zurück Bericht boso

An:  
Q

Kopie:  
Q

Email  
Text:

Als XML senden Als PDF senden

# Messwerte löschen



Einzelne ausgewählte Messwerte bzw. Messwerte die älter als 1/3/6/12 Monate sind, können im Menü „Messwerte“ über den Button „Löschen“ in der unteren Menüleiste gelöscht werden.

Achtung, die Daten werden unwiderruflich gelöscht. Bitte führen Sie rechtzeitig eine Datenarchivierung durch, indem Sie über den Button „Bericht“ eine XML bzw. PDF-Datei erstellen.

	SYS	DIA	PUL	Arr	kg	
30.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,7	<input checked="" type="checkbox"/>
30.03.2016 18:00:00	136	86	66	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,5	<input type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	136	85	68	-	-	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,8	<input checked="" type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	132	83	67	-	-	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,7	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	133	81	65	-	-	<input type="checkbox"/>
28.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,9	<input type="checkbox"/>



## Netzbetrieb

---

DE

Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich die Anschlussbuchse für das Netzgerät. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur das boso-Netzgerät (**Bestell-Nr. 410-7-150**). Dieses Netzgerät ist in der Spannung genau abgestimmt, stabilisiert und richtig gepolt. Fremd-Netzgeräte können eine Schädigung der Elektronik verursachen und den Verlust der Werksgarantie zur Folge haben. Weiterhin kann von Fremd-Netzteilen eine Brandgefahr ausgehen.

# Fehleranzeige

Treten während der Messung Probleme auf, so wird anstatt des Messergebnisses ein Fehler angezeigt.

Bedeutung der Fehleranzeigen:



	Fehlerursache:	Fehlerbehebung:
	Manschettendruck schwankt während der Messung zu stark	Arm ruhig halten
	keine auswertbaren Pulsationen	Lage der Manschette überprüfen (siehe Seite 17) und erneut messen.
	Differenz Systole – Diastole zu gering: Systole – Diastole $\leq 10$ mmHg	Lage der Manschette überprüfen (siehe Seite 17) und erneut messen
	Fehler beim Aufpumpen	evtl. Manschette zu locker angelegt, Manschette fester anlegen (siehe Seite 17)

# Fehleranzeige

DE

Fehlerursache:	Fehlerbehebung:
 <p>Der Pulswert konnte nicht korrekt ermittelt werden.</p>	Lage der Manschette überprüfen und erneut messen.
  <p>Interner Gerätefehler</p>	Entnehmen Sie die Batterien und drücken Sie kurz die START-Taste. Legen Sie die Batterien wieder ein. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, senden Sie das Gerät zur Reparatur an den Hersteller.
 <p>“♥” Anzeige:</p>	Wiederholungsmessung empfohlen; dabei Arm vollkommen ruhig halten. Die wiederholte Anzeige des Symbols “♥” bei ruhig gehaltenem Arm kann ein Hinweis auf Herz-Rhythmus-Störungen sein. Bitte besprechen Sie dies bei Ihrem nächsten Arztbesuch.

# Fehleranzeige

Fehlerursache:	Fehlerbehebung:
 <p data-bbox="271 225 463 339">Fehler bei der Bluetooth-Verbindung</p>	<p data-bbox="587 218 1226 453">Entnehmen Sie die Batterien und drücken Sie kurz die START-Taste. Legen Sie die Batterien wieder ein. Führen Sie erneut eine Kopplung durch. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, senden Sie das Gerät zur Reparatur an den Hersteller.</p>
	<p data-bbox="587 501 1226 692">Bei der Installation der App wird systembedingt die Erlaubnis auf den Zugriff des aktuellen Standorts abgefragt. Diese Abfrage ist mit "JA" zu beantworten um Fehler bei der BT-Verbindung zu vermeiden.</p>

# Reinigung und Desinfektion

---

## Reinigung Gerät:

Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.

DE

## Reinigung Manschette:

Kleine Flecken auf der Manschette können vorsichtig mit handelsüblichem Geschirrspülmittel entfernt werden.

## Desinfektion:

Zur Wischdesinfektion (Einwirkzeit mind. 5 Minuten) des Gerätes empfehlen wir das Desinfektionsmittel antifact liquid (Schülke & Mayr). Zur Desinfektion der Manschette empfehlen wir die Sprühdesinfektion.

Insbesondere wenn das Gerät von mehreren Anwendern verwendet wird, ist auf eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Manschette zu achten.

## Garantiebedingungen

Für dieses Produkt leisten wir 3 Jahre Werksgarantie ab Kaufdatum. Das Kaufdatum ist durch Rechnung nachzuweisen. Innerhalb der Garantiezeit werden Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern kostenlos beseitigt. Durch die Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit auf das ganze Gerät ein, sondern nur auf die ausgewechselten Bauteile.

Von der Garantieleistung ausgenommen ist die Abnutzung durch Verschleiß (z.B. Manschette), Transportschäden sowie alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung (z.B. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung) entstanden sind oder auf Eingriffe von Unbefugten zurückzuführen sind. Durch die Garantie werden keine Schadenersatzansprüche gegen uns begründet.

Die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers gemäß § 437 BGB werden nicht eingeschränkt.

Im Falle der Inanspruchnahme der Garantie ist das Gerät zusammen mit dem Original-Kaufbeleg zu senden an:  
BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG  
Bahnhofstr. 64, D-72417 Jungingen.

boso übernimmt keinerlei Verantwortung für entstandene Verluste wie z.B. Betriebsstörungen oder Datenverluste, die durch die Verwendung dieses Blutdruckmessgerätes auftreten können.

Es wird nicht garantiert, dass dieses Blutdruckmessgerät mit allen Bluetooth-kompatiblen Geräten eine Verbindung herstellen kann.



## Kundendienst

### Kundendienst:

Garantie- und Reparaturarbeiten müssen durch geschultes und autorisiertes Personal durchgeführt werden. Das Gerät darf ohne Erlaubnis des Herstellers nicht geändert werden. Senden Sie das Gerät sorgfältig verpackt und ausreichend frankiert an Ihren autorisierten Fachhändler oder direkt an:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG  
Serviceabteilung  
Bahnhofstraße 64, D-72417 Jungingen  
T: +49 (0) 74 77 / 92 75-0

## Entsorgung



Geräte und Batterien dürfen nicht in den Hausmüll.

Am Ende der Nutzungsdauer muss das Gerät einer Sammelstelle für Elektronik-Altteile zugeführt werden.

Bitte beachten Sie, dass Batterien und wiederaufladbare Batterien hierbei gesondert entsorgt werden müssen. (Sammelstelle Ihrer Gemeinde).

Zu erwartende Betriebs-Lebensdauer des Gerätes: 5 Jahre (bei Benutzung 6 x am Tag).

Zu erwartende Betriebs-Lebensdauer der Manschette: 2 Jahre (bei Benutzung 6 x am Tag).

## Technische Daten

<b>Messprinzip:</b>	Oszillometrisch
<b>Messbereich:</b>	Systolisch: 60 bis 279 mmHg Diastolisch: 40 bis 200 mmHg Puls: 40 bis 180 pro Minute
<b>Manschettendruck:</b>	0 bis 299 mmHg
<b>Anzahl Speicher:</b>	30 Messungen
<b>Anzeige:</b>	LCD
<b>Betriebsbedingungen:</b>	Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C rel. Luftfeuchtigkeit 15 bis 85 %
<b>Lagerbedingungen:</b>	Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C rel. Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 %
<b>Stromversorgung:</b>	DC 6 V (Batterien 4 x 1,5 V Mignon IEC LR 6, Alkali Mangan) alternativ als Sonderaustattung: Netzgerät DC 6 V, Best.-Nr. 410-7-150



## Technische Daten

---

**Typische Lebensdauer der Batterien:**

500 Messzyklen (abhängig von Aufpumphöhe und Nutzungsfrequenz)

DE

**Batteriekontrolle:**

Symbol-Anzeige im Anzeigefeld

**Gewicht:**

250 g ohne Batterien

**Abmessungen (B x H x T):**

96 mm x 68 mm x 130 mm

**Klassifikation:**

Schutzklasse II (□)

**Anwendungsteil:**

Typ BF (⚠)

**Schutz gegen Fremdkörper:**

IP20

**Klinischer Test:**

die Messgenauigkeit entspricht den Anforderungen der ISO 81060 Teil 2

# Technische Daten

---

**Bluetooth**

Bluetooth Version 4.0

**maximale Messabweichung  
des Manschettendrucks:**  $\pm 3$  mmHg

**maximale Messabweichung  
der Pulsanzeige:**  $\pm 5$  %

**Zutreffende Norm:** DIN EN ISO 80601-2-30 „Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated type non-invasive sphygmomanometers“ .



# Prüfanweisung für die messtechnische Kontrolle

## (nur für geschultes Fachpersonal)

DE

Die messtechnische Kontrolle – spätestens alle 2 Jahre – ist durchzuführen von folgenden Einrichtungen oder Personen:

- Hersteller
- für das Messwesen zuständige Behörde
- Personen, welche die Voraussetzungen der Medizinprodukte-Betreiberverordnung erfüllen.

GB

### A) Funktionsprüfung

Eine Funktionsprüfung des Gerätes kann nur am Menschen oder mit einem geeigneten Simulator durchgeführt werden.

### B) Prüfung auf Dichtheit des Druckkreises und Abweichung der Druckanzeige

#### Hinweise:

- a) Wenn der Druck im Messmodus über 299 mmHg gesteigert wird, spricht das Schnellablassventil an und öffnet den Druckkreis. Wenn der Druck im Prüfmodus über 320 mmHg gesteigert wird, blinkt die Messwertanzeige.
- b) Für die Prüfung ist ein spezieller Prüfstecker zu verwenden. Der Prüfstecker ist kostenpflichtig beim Hersteller erhältlich.  
In den Druckkreis ist zusätzlich ein Pumpball einzufügen.

# Prüfanweisung für die messtechnische Kontrolle

## (nur für geschultes Fachpersonal)

### Prüfung

5.) Gerät durch erneutes Drücken der START-Taste ausschalten.



- 1.) Batterien entnehmen.
- 2.) START-Taste gedrückt halten und Batterien einsetzen.
- 3.) START-Taste loslassen.  
Das Gerät befindet sich jetzt im Prüfmodus; in den Feldern SYS und DIA wird der aktuelle Druck angezeigt.
- 4.) Prüfung auf Abweichung der Druckanzeige und Dichtheit des Druckkreises (Setzzeit der Manschette – mindestens 30 s – beachten) in der üblichen Weise durchführen.

# Table of contents

---

Product features.....	48
Contents of package .....	49
Quick guide .....	50
Introduction.....	51
Purpose.....	52
Blood pressure values.....	53
Systolic and diastolic blood pressure value .....	53
WHO blood pressure cut-off values .....	53
Starting up.....	55
Inserting batteries .....	55
Battery status.....	56
General instructions for self-measurement.....	57
General Notices for Bluetooth Connection.....	59
Preparing to measure your blood pressure.....	61
Note on cuff sizes .....	61
Attaching the cuff.....	62



# Table of contents

---

Measuring your blood pressure.....	65
Interrupting a measurement.....	66
Measurement display.....	67
Set up app and create connection.....	69
Measuring and transferring blood pressure.....	73
Evaluating and sending measurements.....	75
Deleting measurement values.....	77
Mains operation.....	78
Error messages.....	79
Cleaning and Disinfection.....	82
Warranty Conditions.....	83
Customer service / Disposal.....	84
Technical data.....	85
Calibration checks - Testing instructions (for trained specialist staff only).....	88



## Product features



-  Battery status display see page 56
-  Measurement in progress see page 66
-  Irregular heartbeat during measurement see page 67, 80
-   **WARNING:** To avoid the danger of suffocation, keep this bag away from babies and children. Do not use in cribs, cots, beds, carriage, prams or playpens. This bag is not a toy. see bag
-  Bluetooth communication active

# Contents of package

1 **boso medicus system**  
blood pressure monitor



4 LR 6 (AA) batteries



1 CA 04 universal cuff



1 User  
instructions



1 Bag



## Quick guide

- ➔ Insert batteries, ensure correct positioning (P. 55)
- ➔ Connect cuff to monitor (P. 61)
- ➔ Attach cuff (P. 62)
- ➔ Start (and stop) a measurement by pressing the start button (P. 65)

GB

Measured systolic, diastolic and pulse values are displayed after the measurement is completed (P. 67)



This quick guide does not replace the detailed information on the use and safety of the blood pressure monitor featured in the user instructions.



Please be sure therefore to read the user instructions!

# Introduction

Dear Customer,

We are delighted that you have decided to purchase a bosso blood pressure monitor. The bosso brand is synonymous with optimal quality and precision and is also number 1 among professionals: 96% of all German doctors currently use bosso blood pressure monitors. The experience gained from decades of use by professionals has also been incorporated into all the patient monitors for home measurement.

This instrument has also passed our strict quality control procedures and is your reliable partner for monitoring your blood pressure values.



Please read these user instructions before using the instrument for the first time, as correct blood pressure readings

can only be obtained if the instrument is operated correctly.

In these user instructions, „➡“ means an action by the user.

To get help concerning usage or maintenance please contact your dealer or the manufacturer (contact details can be found on the back cover of this manual).

An unexpected operating condition or an incidence which has worsened the health condition or could have worsened the health condition should be reported to the manufacturer immediately.

If the instrument is to be sold, ensure that these user instructions are enclosed.

## Introduction

---

If the monitor is used in medical practice (in accordance with the legislation governing the operation of medical devices), it should be calibrated at regular intervals (see page 88).



Wireless communication devices, such as home networking devices, mobile phones, cordless phones and their base stations, walkie-talkies can affect this blood pressure monitor. Therefore, a minimum distance of 11 feet should be kept from such devices. Do not use a cell phone during the blood pressure measurement.

This device conforms to the European medical products guidelines 93/42/EWG. This is confirmed by the CE marking CE

0124. (The ID number 0124 stands for the notified body DEKRA)

The Bluetooth radio transmission of the device conforms to the telecommunications guidelines 1999/5/EG.

### Purpose

Non-invasive recording of systolic and diastolic blood pressure and pulse frequency in humans.

The instrument can be used with any arm circumference as shown on the corresponding cuff.

## Blood pressure values

To determine the blood pressure, **two values** need to be measured:

- **Systolic (upper) blood pressure:**

This is produced when the heart muscle contracts and blood is forced into the blood vessels.

- **Diastolic (lower) blood pressure:**

This is present when the heart muscle expands and fills with blood again.

Blood pressure measurement values are expressed in mmHg (mm of mercury).

The World Health Organization (WHO) has defined the following cut-off values for assessing blood pressure:

	systolic	diastolic
High blood pressure (hypertension)	over 140 mmHg	over 90 mmHg
Borderline normal blood pressure	130 to 139 mmHg	85 to 89 mmHg
Normal blood pressure	120 to 129 mmHg	80 to 84 mmHg
Optimum blood pressure	up to 119 mmHg	up to 79 mmHg

## Blood pressure values

---

Whether medical treatment is necessary depends not only on the blood pressure, but also on the patient's risk profile. Please contact your GP if one of the values (systole, diastole) consistently exceeds the cut-off point for high blood pressure.

GB

Self-measurement of blood pressure often produces somewhat lower values at home

than at the doctor's. The German Hypertension League has therefore defined lower cut-off values for home measurements:

Home measurement:	135/85 mmHg
Measurement in the doctor's surgery:	140/90 mmHg

## Starting up

The device must be installed and put into operation in accordance with the instructions in this manual.

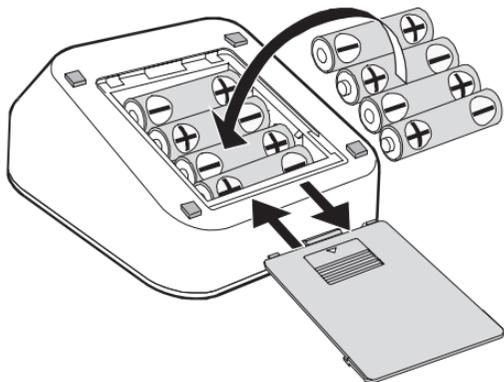


Illustration 1

➔ Use only high quality leak-proof batteries of the correct specifications (see "Technical data" P. 85).

**⚠** **Never** mix old and new batteries or different makes.

**⚠** If the batteries are not inserted correctly, the monitor will not work and this may cause the batteries to heat up and leak, damaging the monitor.

### ➔ Inserting the batteries

The battery compartment is located on the underside of the monitor. Insert batteries in the battery compartment as shown in illustration 1.

➔ Remove the batteries if the monitor is not to be used for any length of time.

## Starting up

The monitor has a battery status display (see P. 48)



Battery fully charged.



Battery partially charged.



Replace battery soon.



Flashing! No further measurements possible.  
Replace battery.



### Care for the environment

Do not dispose of used batteries and charger units in domestic waste. You can take these to collection sites for used batteries or special waste. Contact your local authority for information.

## General instructions for self-measurement

1. Fluctuations in blood pressure are quite normal. Even when measurements are repeated, there can be marked differences. Single or irregular measurements do not provide reliable information about the actual blood pressure. A reliable evaluation is only possible if regular measurements are taken under comparable conditions and the measurement values entered in the blood pressure record card.
2.  Self-testing does not mean self-treatment. Do not on **any** account change the dose of medicine prescribed by your doctor of your own accord.
3. Irregular heartbeats can affect the accuracy of the monitor or result in incorrect measurements (see page 80).
4. Incorrect measurements can also occur in patients with a weak pulse (possibly in patients wearing a pacemaker, for example). The blood pressure monitor itself has no effect on the pacemaker.
5. If you are pregnant, consult your doctor before using the monitor.
6. Always take the measurement in a calm and relaxed state.  
You are recommended to check your blood pressure twice a day – in the morning on getting up and in the evening once you have relaxed after work.
7. Always measure your blood pressure from the arm with the higher blood pressure values (where not required otherwise (see page 63)).

## General instructions for self-measurement

---

To do this, measure the blood pressure first in both arms and thereafter always from the arm with the higher blood pressure.

## General Notices for Bluetooth Connection

-  The blood pressure monitor may not be used in locations where wireless communication is prohibited, such as in aircraft or hospitals. This blood pressure monitor can have unfavorable effects on electronic devices or electrical medical devices.
- The maximum communication distance between the blood pressure monitor and the receiver equals approx. 10 meters. This distance can be reduced by the environment; therefore, verify whether the distance is short enough for transmission of data after the measurement.
- Ensure that the space between the blood pressure monitor and the mobile device is unobstructed. The communication distance can be shortened by the construction of the building or other obstacles. Communication through reinforced concrete walls in particular may not be possible under certain circumstances.
- During pairing, Bluetooth must be deactivated on all other devices within range.
- If the improbable case should occur that this blood pressure monitor disrupts other wireless communication devices, use the blood pressure monitor at a different location.

## General Notices for Bluetooth Connection

---

- Do not use the Bluetooth connection in the vicinity of an IEEE802.11g/b/n-WLAN device or other wireless communications systems (particularly in the range of 2.4 GHz) or near devices which emit electromagnetic waves (such as microwave appliances). This can cause the connection to be frequently interrupted, communication speed to be significantly reduced and errors to occur.

## Preparing to measure your blood pressure

### Note on cuff sizes:

**!** The monitor may only be used with the following cuff types. These should be chosen according to the upper arm circumference printed on them.

Type	Arm circumference	Order number
CA01	22 – 32 cm	143-4-764
CA02	32 – 48 cm	143-4-757
CA04	22 – 42 cm	143-4-765*

\* Standard cuff supplied as standard.

Attach the cuff to the monitor by pressing the plug (click) into the socket on the left side of the unit. (See illustration 2).

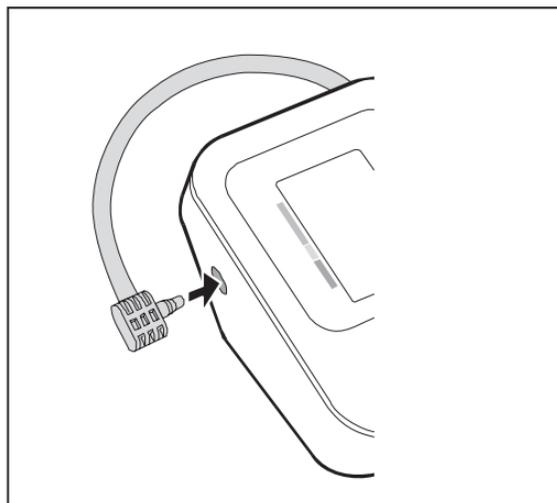


Illustration 2



## Preparing to measure your blood pressure

Observe the following instructions when measuring your blood pressure:



Avoid smoking or drinking coffee for one hour before measuring your blood pressure.

GB



Sit comfortably for the blood pressure measurement. Support your back and arms. Do not cross your legs. Place your feet flat on the floor.

Relax for 5 minutes before taking a measurement.

Do not move during the measurement.

### Attaching the cuff

The measurement should be taken from the bare upper arm.



In the case of tightly fitting outer clothing, ensure that the blood supply to the arm is not cut off when the sleeve is rolled up (if necessary remove the article of clothing before taking the measurement).

➔ Open out the cuff into the shape of a ring and slide it over the upper arm until the bottom edge of the cuff is about 2-3 cm above the elbow. The cuff must be positioned so that the marking is over the artery (see illustration 3).

## Preparing to measure your blood pressure

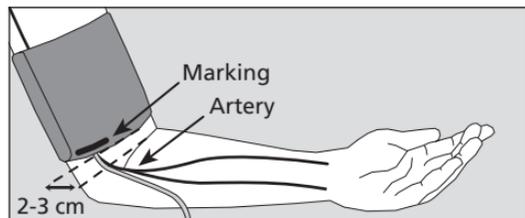


Illustration 3

⚠ Do not attach the cuff over wounds as this can cause further injuries.

⚠ Ensure that the cuff is not attached to an arm where arteries or veins are undergoing or have undergone medical treatment (e.g. shunt).

⚠ For women who have had a breast amputated, do not attach the cuff to the arm on the amputated side of the body.

⚠ During the measurement, medical apparatus that are being used on the same arm at the same time, may malfunction.

⚠ The cuff must not be too tight. There should be enough space to fit roughly two fingers between arm and cuff.

⚠ The metal ring should **never** lie over the artery (see illustration 3) as this may produce a false reading.

➔ Grasp the end of the cuff that feeds through the metal ring and wrap it around the outside of your arm. Attach the Velcro fastener by applying gentle pressure.

## Preparing to measure your blood pressure

- ➔ Place your arm with the cuff attached on the table, holding it relaxed and slightly bent so that the cuff is level with your heart.

**⚠** Check that the air tube is not kinked during the measurement. This could cause congestion of the blood flow and subsequent injury.

GB

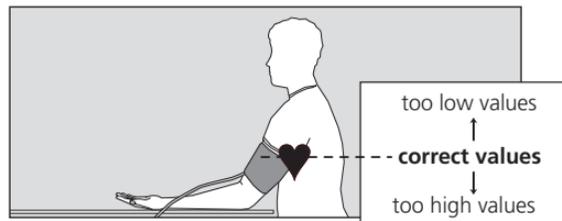


Illustration 4

**⚠** The blood pressure measurement should not prevent the flow of blood for an unnecessary length of time (> 2 minutes). If the monitor fails to function correctly, remove the cuff from the arm.

**⚠** Excessive frequent measurements can cause injury by restricting blood flow.



Do not talk during the measurement.

## Measuring your blood pressure

- ➔ Start the measurement with the start button



- ⚠ Now hold the arm absolutely still and do not talk.

All the items on the LCD display appear briefly to indicate that the monitor is now ready for use (see illustration 5).

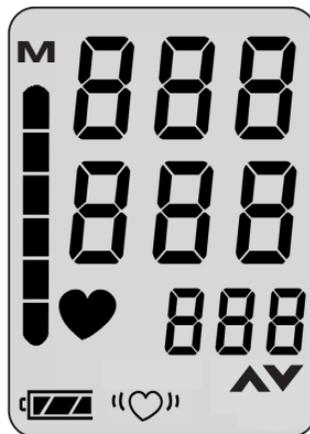


Illustration 5



## Measuring your blood pressure

The pump starts to inflate the cuff.

The monitor has an intelligent automatic inflation system for gentle inflation to the correct cuff pressure.

The rising cuff pressure is displayed as a digital numerical value and in the form of a bar on the left-hand edge of the display.

When the **required pressure** is reached, the pump switches off and the air is released slowly from the cuff.

### **Interrupting a measurement:**

A measurement can be interrupted at any stage by pressing the start button; the cuff deflates automatically.

During the measurement phase the descending cuff pressure and the flashing  symbol are displayed (see illustration 6).



Illustration 6

## Measurement display

After the end of the measurement, the in-built valve opens automatically and the cuff deflates rapidly.

The measured blood pressure values (systole, diastole, pulse) are displayed (see illustration 7).



Illustration 7

If the symbol "♡" appears after the measurement, it is recommended that the measurement is repeated, holding the arm completely still. If the "♡" symbol appears again even with the arm held still, this may be an indication of an irregular heartbeat. Please discuss this with your doctor at your next visit.

Blood pressure is a dynamic parameter and can be affected by the patient's position, e.g. sitting, standing, lying, moving, before or during the measurement, physical condition (stress, disease, etc.).

➔ If the measurement result is obviously wrong, repeat the measurement.

## Measurement display

---

The unit switches itself off automatically after about 1 min. To repeat a measurement, press the start button again **briefly**.



Allow at least two minutes between measurements.

A dark grey square containing a white circle with the letters 'GB' inside.

➔ If no further measurement is required, remove the cuff from the arm.

## Set up app and create connection



Requires interaction with boso-App



Requires interaction with boso medicus system

To enable data exchange between the blood pressure monitor and your mobile device, follow these steps:



– Ensure that Bluetooth is activated on your mobile device. (Bluetooth 4.0 is required)

– Download the boso app from the Google/Apple Store.



When installing the app, the system will ask for permission to access the current location. You must answer "YES" in order to avoid BT connection errors.

# Set up app and create connection



- Open the boso app on your mobile device.
- Set up a new user:
  1. Select "User" from the main menu.
  2. Select "+New" from the bottom menu bar.
  3. Enter your personal data. Compulsory fields are indicated by "\*" .
  4. Click on the "Save" button in the bottom menu bar to save the data you have entered.
- Tick the user for whom you wish to save the measurement values.

GB



## Set up app and create connection



- Use the “Back” button in the top menu bar to return to the main menu.
- Open “Devices” in the main menu.



- Press the START key on the blood pressure monitor and hold it down until “Pr” appears on the display. The communication indicator is shown on the display for approximately one minute.



- In the “Devices” menu, select “Add new device” in the bottom menu bar.



If you are using iOS, you must also press “Pair” to confirm the pairing request.



- Date and time are automatically synchronised by the mobile device.



- After pairing successfully, “End” appears in the display on the monitor and the monitor is displayed in the device list in the app.

Setup is now complete. Now leave the menu via the “Back” button in the top menu bar.

## Set up app and create connection

---

The blood pressure monitor must be reconnected to the mobile device **after changing the batteries**, as the time information is deleted when the batteries are changed.

If this is not done, the current system time of the mobile device is stored as the time stamp for the readings during data transfer.

Please proceed as follows:

- Delete the blood pressure monitor from the devices list in the app
- Delete the blood pressure monitor from the Bluetooth settings of the mobile device
- Pair again as described.

## Measuring and transferring blood pressure

Now put on the cuff and carry out a blood pressure measurement as described in the user instructions.



As long as Bluetooth is active and the app is running, the measured values are automatically transferred after the blood pressure measurement has been completed.



After successful transfer, the measurement value is deleted from the measurement value memory of the blood pressure monitor.



Repeat the pairing process if the measurement data have not been transferred. If the app or Bluetooth are inactive, up to 30 measurement

values are automatically saved in the blood pressure monitor (If the measurement value memory of 30 measurements is full, the oldest measurement is deleted and the current measurement is saved. Faulty measurements are not saved) and sent after the next measurement once the app has been activated.

In order to enable all saved measurement values in the medicus system measurement value memory to be transferred to the app, measurement value transfer of all measurement values must be activated in the "Settings" menu (default setting). If "last" is selected here,

# Measuring and transferring blood pressure

only the last measured measurement value is transferred and all saved measurement values are deleted.

Times for the morning and afternoon evaluations can also be altered in this menu.

Save your settings by using the "Save" button in the bottom menu bar.

"bosogramm system" is intended for a scale.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) screen in the 'boso' application. At the top, there is a 'Zurück' (Back) button and the 'boso' logo. The settings are organized into sections:

- Allgemeine Einstellungen**: Includes 'Beginn Vormittag Auswertung' set to 00:00 and 'Beginn Nachmittag Auswertung' set to 12:00.
- boso medicus system**: Features a 'Messwertübernahme' (Measurement Transfer) section with two options: 'letzter' (last) and 'alle' (all). The 'alle' option is currently selected and highlighted with a dark background.
- bosogramm system**: Features a 'Modus' (Mode) section with two options: 'singleuser' and 'multiuser'. The 'multiuser' option is currently selected and highlighted with a dark background.

At the bottom of the screen, there is a navigation bar with two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Speichern' (Save).

# Evaluating and sending measurements




All measurement values that have been sent so far are displayed in the "Measurement values" menu.

Use the "Graphs" button in the bottom menu bar to see a graphic representation of the measurement values.

The buttons in the top area of the screen allow you to select the graphs available: "SYS/DIA" and "PULSE". Click on a graph to enlarge or shrink it.

"kg/BMI" is intended for scales.

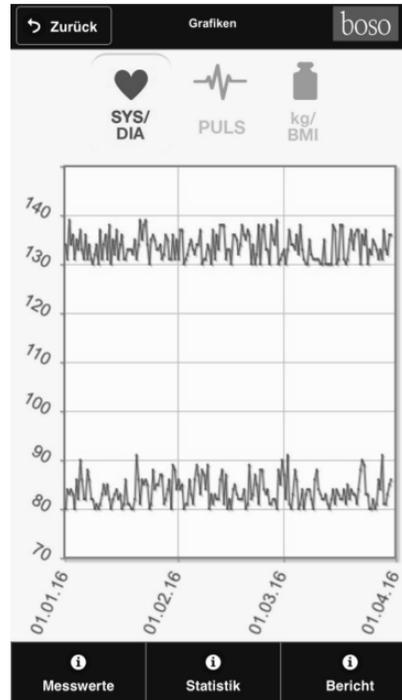

# Evaluating and sending measurements



Use the "Statistics" button in the bottom menu bar to see a statistical summary of the measurement values. The time range for the summary (date from/to) can be selected.

GB

The "Report" button in the bottom menu bar takes you to the menu which you use to send measurement values. The summary can be sent by email in PDF or XML format. The XML file can be imported into the PC program "boso profilemanager XD Home." This program offers additional evaluation options and is available free of charge from the Internet (<http://www.boso.de/download/profilmanagerXDHome/>).

→ Zurück Bericht boso

An:

Kopie:

Email  
Text:

Als XML senden Als PDF senden

# Deleting measurement values



Individually selected measurement values or measurement data older than 1/3/6/12 months can be deleted via the “Delete” button in the bottom menu bar.

Note that data cannot be restored. Please archive your data in good time by creating an XML or PDF file using the “Report” button.

The screenshot shows the 'Messwerte' (Measurements) screen of the 'boso' application. At the top, there is a 'Zurück' (Back) button and the 'boso' logo. Below the header, there is a clock icon and a table of measurement data. The table has columns for 'SYS', 'DIA', 'PUL', 'Arr', 'kg', and a checkbox for deletion. The bottom menu bar contains four buttons: 'Grafiken' (Charts), 'Statistik' (Statistics), 'Bericht' (Report), and 'Löschen' (Delete).

	SYS	DIA	PUL	Arr	kg	
30.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,7	<input checked="" type="checkbox"/>
30.03.2016 18:00:00	136	86	66	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,5	<input type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	136	85	68	-	-	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,8	<input checked="" type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	132	83	67	-	-	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,7	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	133	81	65	-	-	<input type="checkbox"/>
28.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,9	<input type="checkbox"/>



## Mains operation

---

The mains connection socket is located at the rear of the monitor.

Where required, use only the bosco power supply unit (**order number 410-7-150**). This power supply unit produces a rectified output of the correct polarity. Other commercially available power supply units can cause damage to the electronic components, which will invalidate the warranty. There is also a risk of fire with these other power supply units.



## Error messages

If any problems occur during the measurement, the display will show an error message instead of a blood pressure reading.

Meaning of error messages:

	Cause of <b>Err</b> message:	Troubleshooting:
	Excessive variation in cuff pressure during measurement	Hold arm still.
	No valid pulse readings	Check position of cuff (see page 61) and repeat measurement.
	Systole – diastole difference too small: Systole – diastole $\leq 10$ mmHg	Check position of cuff (see page 61) and repeat measurement.
	Incorrectly inflated	Cuff possibly too loose, attach cuff more firmly (see page 61)

## Error messages

GB

Cause of <b>Err</b> message:		Troubleshooting:
	The pulse value could not be determined correctly.	Check position of cuff and repeat measurement.
	Internal Error	Remove the batteries and briefly press START button. Put the batteries back into the monitor. If the error persists, return the instrument for repairs to the manufacturer.
		
	“♥” Display:	<b>Troubleshooting:</b> Repeat measurement recommended, holding the arm absolutely still. If the “♥” symbol appears again, even with the arm held still, this may be an indication of an irregular heartbeat. Please discuss this with your doctor at your next visit.

# Fehleranzeige

## Cause of **Err** message: Troubleshooting:



Bluetooth connection error

Remove the batteries and briefly press START button. Put the batteries back into the monitor. Carry out the pairing again. If the error persists, return the instrument for repairs to the manufacturer.



When installing the app, the system will ask for permission to access the current location. You must answer "YES" in order to avoid BT connection errors.



## Cleaning and Disinfection

---

### **Cleaning Monitor:**

Use a soft, dry cloth to clean your monitor.

### **Cleaning Cuff:**

Small stains on the cuff can be removed carefully with a proprietary washing-up liquid.



### **Disinfection Cuff:**

For disinfectant wipes (at least 5 minutes exposure time) of the device and the cuff, we recommend the disinfectant antiseptic liquid (Schülke & Mayr). To disinfect the cuff, we recommend spray disinfection.

In particular, if the device is used on multiple users it is to pay attention to regular cleaning and disinfections of the cuff.

## Warranty Conditions

---

We give 3 years warranty from the date of purchase. The purchase date has to be proven by the invoice. Within the warranty period defects are eliminated free of charge. After repairs the warranty period is not extended on the whole unit, but only to the replaced components.

Excluded from the warranty are parts subject to normal wear and tear (e.g. cuff), transport damages and any damage caused by improper handling (e.g. non-compliance with the instructions for use). Damages due to disassembly by unauthorized persons are also excluded from warranty.

No claims for damages against us are substantiated by the warranty.

In the case of justified warranty claims the device has to be sent along with the original invoice to:

BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG,  
Bahnhofstr. 64, D-72417 Jungingen.

boso accepts no responsibility for losses, such as operational disruptions or data losses, which can occur due to the use of this blood pressure monitor.

No guarantee is made that this blood pressure monitor can establish a connection with all Bluetooth-compatible devices.



## Customer service

### Customer service:

Warranty and repair work must be undertaken by trained and authorised personnel. Do not modify this equipment without authorization of the manufacturer.

Send the monitor, carefully packaged and with sufficient postage, to your authorised dealer or directly to:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG  
Serviceabteilung  
Bahnhofstraße 64, D-72417 Jungingen  
T: +49 (0) 74 77 / 92 75-0



## Disposal



Do not dispose of monitors and batteries in the domestic waste.

At the end of its lifespan, the monitor must be taken to a collection site for obsolete electronic items.

Please note that batteries and rechargeable batteries must be disposed of separately (local authority collection site).

Expected operational lifetime of the equipment: 5 years (using the unit 6 times a day).  
Expected operational lifetime of the cuff: 2 years (using the unit 6 times a day).

## Technical data

---

<b>Measurement principle:</b>	oscillometric
<b>Measurement range:</b>	Systolic: 60 to 279 mmHg Diastolic: 40 to 200 mmHg Pulse: 40 to 180 per minute
<b>Cuff pressure:</b>	0 to 299 mmHg
<b>Memory store:</b>	30 measurements
<b>Display:</b>	LCD
<b>Operating conditions:</b>	environmental temperature +10°C to +40°C Relative humidity 15 to 85%
<b>Storage conditions:</b>	environmental temperature -20°C to +60°C Relative humidity 10 to 95%
<b>Power supply:</b>	DC 6 V (4 x 1.5 V Mignon IEC LR 6 alkaline manganese batteries) Alternative special option: DC 6 V power supply unit, Order No. 410-7-150



## Technical data

---

<b>Typical battery life:</b>	500 measurement cycles (depending on inflation pressure and frequency of use).
<b>Battery check:</b>	symbol display in LCD window
<b>Weight:</b>	250 g without batteries
 <b>Dimensions (WxHxD):</b>	96 mm x 68 mm x 130 mm
<b>Classification:</b>	Protection class II (□)
<b>Applied part:</b>	Type BF (⚡)
<b>Protection against solid objects:</b>	IP20
<b>Clinical test:</b>	Accuracy complies with the requirements of ISO 81060 Part 2

## Technical data

---

**Bluetooth**

Bluetooth Version 4.0

**Maximum deviation of cuff pressure measurement:**  $\pm 3$  mmHg

**Maximum deviation of pulse rate display:**  $\pm 5$  %

**Applicable standards:** DIN EN ISO 80601-2-30 „Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated type non-invasive sphygmomanometers“ .



# Calibration checks - Testing instructions

## (for trained specialist staff only)

Calibration checks – every 2 years at the latest – must be performed by the following institutions or persons:

- Manufacturer
- Trade measurements authorities
- Persons who fulfil the requirements of the legislation governing the operation of medical devices.

### A) Function testing

Function testing of the monitor can only be carried out on a person or with a suitable simulator.

### B) Testing of pressure circuit integrity and deviation of pressure display

#### **Note:**

- a) When the pressure in measurement mode increases above 299 mmHg, the quick release valve is triggered and the pressure circuit opens. When the pressure in test mode increases above 320 mmHg, the measured value display flashes.
- b) For the calibration checks a special test plug must be used. The test plug is available for a fee from the manufacturer.  
A pump ball must also be introduced into the pressure circuit.

# Calibration checks - Testing instructions

## (for trained specialist staff only)

### Testing

- 1.) Remove batteries.
- 2.) Hold start button pressed down and insert batteries.
- 3.) Release start button.  
The monitor is now ready for testing; the current pressure is displayed in the SYS and DIA fields.
- 4.) Perform test for deviation of pressure display and pressure circuit integrity (observe setting time for cuff – at least 30 seconds) in the usual manner.

5.) Switch off monitor by pressing the START button again.

# Table des matières

Présentation de l'appareil.....	92
Contenu de l'emballage.....	93
Guide rapide d'utilisation.....	94
Introduction.....	95
Destination.....	96
Valeurs de la tension artérielle.....	97
Tensions artérielles systolique et diastolique.....	97
Valeurs limites de l'OMS pour l'analyse de la tension artérielle.....	97
Mise en service de l'appareil.....	99
Mise en place des piles.....	99
Témoin de charge des piles.....	100
Recommandations générales sur l'automesure de la tension artérielle.....	101
Indications générales sur la connexion Bluetooth.....	103
Préparation de la mesure de la tension artérielle.....	105
Recommandations relatives aux dimensions du brassard.....	105
Pose du brassard.....	106

# Table des matières

Mesure de la tension artérielle .....	109
Interruption de la mesure.....	110
Affichage des valeurs mesurées.....	111
Installer l'application et établir la communication.....	113
Mesure de la tension et transfert des données.....	117
Évaluation et envoi des données.....	119
Suppression de mesures.....	121
Transmission des données sur l'application boso.....	122
Messages d'erreur.....	123
Nettoyage et désinfection.....	126
Conditions de Garantie.....	127
Service après-vente / Élimination .....	128
Caractéristiques techniques.....	129
Instructions relatives au contrôle technique de l'appareil (uniquement pour les techniciens formés) .....	132

## Présentation de l'appareil



FR

-  Témoine de charge des piles voir page 100
-  Mesure en cours voir page 110
-  Trouble du rythme cardiaque pendant la mesure voir pages 111, 124
-   **AVERTISSEMENT!** Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque d'étouffement, tenir hors de portée des enfants. voir étui
-  Communication Bluetooth activée

# Contenu de l'emballage

1 tensiomètre  
**boso medicus system**



4 piles LR 6 (AA)



1 brassard standard  
CA 04



1 mode d'emploi



1 étui



## Guide rapide d'utilisation

- ➔ Insérez les piles en respectant la polarité (page 99).
- ➔ Reliez le brassard à l'appareil (page 105).
- ➔ Posez le brassard (page 106).
- ➔ Appuyez sur la touche Marche pour lancer/arrêter une mesure (page 109).

FR

Les valeurs de la systole, de la diastole et du pouls sont affichées après la mesure (page 111).



Ce guide rapide d'utilisation ne remplace pas les informations détaillées contenues dans le mode d'emploi et relatives à l'utilisation et à la sécurité de votre tensiomètre.



Veillez lire attentivement le mode d'emploi !

## Introduction

Cher client, chère cliente, félicitations pour l'achat de ce tensiomètre boso. La marque boso, synonyme de qualité et précision, est aussi numéro 1 chez les professionnels. Aujourd'hui, le tensiomètre boso est utilisé par 96 % des médecins allemands. Chaque appareil boso destiné à l'automesure profite d'un savoir-faire de plusieurs décennies dans le domaine professionnel.

Cet appareil qui a subi un contrôle-qualité rigoureux est un outil sûr de contrôle de la tension artérielle.



Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation. Une utilisation conforme de l'appareil est indispensable pour garantir une mesure correcte de la tension artérielle.

Dans ce mode d'emploi, le symbole « ➡ » indique une action de l'utilisateur.

Pour obtenir de l'aide relative à la mise en service, l'utilisation ou la maintenance, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au fabricant (les coordonnées figurent sur la quatrième de couverture de ce mode d'emploi).

En cas d'incident ou d'état de fonctionnement inattendu qui a altéré l'état de santé ou qui aurait pu altérer l'état de santé, le constructeur devra immédiatement être averti.

Ce mode d'emploi doit être joint en cas de cession de l'appareil.

## Introduction

En cas d'utilisation de l'appareil dans le cadre d'une thérapie (conformément à la réglementation nationale en vigueur), des contrôles techniques réguliers sont obligatoires (voir page 132).

Des appareils de communication sans fil, tels que appareils réseau domestiques sans fil, téléphones portables, téléphones sans fil et leurs stations de base, des talkies-walkies peuvent affecter ce moniteur de pression artérielle. Par conséquent, une distance minimale de 3,3 mètres doit être maintenue pour de tels dispositifs. Ne pas passer d'appel avec un téléphone portable pendant la mesure de la tension.

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne concernant les produits médicaux 93/42/CEE. Cela est confir-

mé par l'identifiant CE : CE 0124. (Le nombre 0124 correspond à l'organisme désigné DEKRA)

La radio transmission Bluetooth de l'appareil répond aux exigences de la directive de télécommunication 1999/5/CE.

## Destination

Mesure non-invasive de la pression systolique et diastolique et de la fréquence du pouls chez l'humain.

Le tensiomètre est conçu pour tous les tours de bras comme indiqué sur le brassard.

## Valeurs de la tension artérielle

Pour obtenir la tension artérielle, **deux valeurs** doivent être mesurées :

- **la tension artérielle systolique (supérieure) :**

Elle apparaît lors de la contraction du muscle cardiaque qui entraîne l'éjection du sang dans les vaisseaux sanguins.

- **Tension artérielle diastolique (inférieure) :**

Elle apparaît lors de la dilatation du muscle cardiaque qui se remplit de nouveau de sang.

Les valeurs mesurées de la tension artérielle sont indiquées en mmHg (millimètres de mercure).

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a défini les valeurs limites suivantes pour la classification de la tension artérielle :

	Systolique	Diastolique
Tension trop haute (hypertonie)	> 140 mmHg	> 90 mmHg
Tension normale - haute	130 à 139 mmHg	85 à 89 mmHg
Tension normale	120 à 129 mmHg	80 à 84 mmHg
Tension optimale	jusqu'à 119 mmHg	jusqu'à 79 mmHg

## Valeurs de la tension artérielle

---

Lorsqu'un traitement médicamenteux est nécessaire, la tension artérielle n'est pas le seul élément à prendre en compte ; il y a aussi le profil de risque du patient. Veuillez consulter votre médecin si une seule des valeurs (systolique, diastolique) est en permanence au-delà des valeurs limites, signalant une haute tension.

L'automesure de la tension fournit souvent des valeurs légèrement inférieures à celles mesurées dans le cabinet médical par le médecin. C'est pourquoi la Ligue allemande d'hypertension a défini des valeurs plus basses pour l'automesure :

Mesure au domicile :	135/85 mmHg
Mesure au cabinet médical :	140/90 mmHg

## Mise en service de l'appareil

L'appareil doit être installé et mis en service selon les informations contenues dans ce manuel.

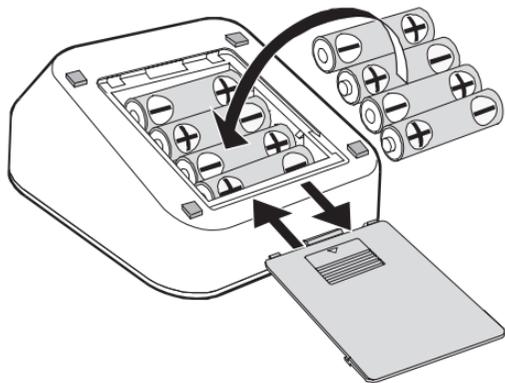


Figure 1

- ➔ Utilisez uniquement des piles étanches de qualité et conformes aux spécifications (voir « Caractéristiques techniques », page 129).

**⚠** Ne mélangez **jamais** d'anciennes piles avec de nouvelles piles ou des piles de types différents.

**⚠** En cas de polarité incorrecte, l'appareil ne fonctionne pas et un dégagement de chaleur est possible ou alors les piles fuient et entraînent la détérioration de l'appareil.

### ➔ Mise en place des piles

Le compartiment à piles se trouve sur la face inférieure de l'appareil. Insérez les piles comme sur la figure 1 dans le compartiment à piles.

- ➔ Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez les piles.

## Mise en service de l'appareil

L'appareil est doté d'un témoin de charge des piles (voir page 92).

-  Piles totalement chargées.
-  Piles partiellement usées.
-  Les piles doivent être bientôt remplacées.
-  Clignotant ! Aucune mesure n'est possible. Remplacer les piles.

### **Contribuez au respect de l'environnement**

Les piles et batteries usées ne sont pas des ordures ménagères.

Il s'agit de déchets spéciaux qui doivent être rapportés aux points de collecte prévus.

Pour en savoir plus, adressez-vous à la mairie de votre localité.

# Recommandations générales sur l'automesure de la tension artérielle

1. Les variations de la tension artérielle sont normales. D'importantes différences sont également possibles lors de la répétition d'une même mesure. Des mesures uniques ou irrégulières fournissent des données peu fiables sur la tension artérielle réelle. Une appréciation fiable est possible uniquement lorsque vous réalisez les mesures dans des conditions similaires et que vous notez les valeurs mesurées dans le carnet de suivi.
2.  L'automesure n'est pas synonyme de thérapie. Ne modifiez **jamais** vous-même les posologies prescrites par votre médecin.
3. Des troubles du rythme cardiaque peuvent avoir un impact sur la précision de mesure de l'appareil, voire entraîner des mesures erronées (voir page 124).
4. Chez les patients présentant un faible pouls (notamment en cas de stimulateur cardiaque par exemple), des erreurs de mesure sont possibles. Le tensiomètre n'interfère pas sur le fonctionnement du stimulateur cardiaque.
5. En cas de grossesse, un avis médical est indispensable avant l'utilisation de l'appareil.
6. La mesure doit toujours avoir lieu au repos. Il est recommandé de contrôler la tension artérielle deux fois par jour – le matin au lever et le soir après s'être reposé des fatigues de la journée.

## Recommandations générales sur l'automesure de la tension artérielle

---

7. La tension artérielle (sauf contre-indication, voir page 107) se mesure toujours au bras présentant les valeurs les plus élevées. Mesurez la tension artérielle d'abord aux deux bras, puis au bras dont la tension est la plus élevée.

## Indications générales sur la connexion Bluetooth

-  L'appareil de mesure de la tension ne doit pas être utilisé dans des lieux où la communication sans fil est interdite, comme par ex. dans les avions ou les hôpitaux. Cet appareil de mesure de la tension peut avoir des effets indésirables sur les appareils électroniques ou les appareils médicaux électriques.
- La distance maximale de transmission entre l'appareil de mesure de la tension et le receveur est de 10 mètres. Cette distance peut être moindre en fonction du cadre alentours ; vérifiez donc que la distance pour la transmission des données après la mesure est suffisamment faible.
- Faites attention à ce que l'espace entre l'appareil de mesure de la tension et l'appareil mobile ne soit pas isolé. La distance de communication peut être réduite suivant le type de construction du bâtiment. Notamment, il se peut que la transmission à travers des murs en béton armé, etc. ne soit pas possible.
- Pendant la connexion, tous les autres appareils Bluetooth situés à portée de signal doivent être désactivés.
- Dans le cas peu probable où l'appareil de mesure de la tension perturberait d'autres appareils de transmission sans fil, utilisez l'appareil de mesure de la tension dans un autre lieu.

## Indications générales sur la connexion Bluetooth

---

- N'utilisez pas la connexion Bluetooth à proximité d'un appareil Wifi IEEE802.11g/b/n ou d'un autre système de transmission sans fil (notamment dans la zone de 2,4 GHz) ou à proximité d'appareils émettant des ondes électromagnétiques (par ex. des appareils à micro-ondes). Cela pourrait provoquer des coupures répétées de la connexion, une vitesse de transmission bien plus basse et des erreurs.

## Préparation de la mesure de la tension artérielle

### Recommandations relatives aux dimensions du brassard :

 L'appareil peut être utilisé avec les brassards suivants uniquement. Ces derniers doivent être choisis en fonction du tour de bras indiqué.

Modèle	Tour de bras	N° de référence
CA01	22 – 32 cm	143-4-764
CA02	32 – 48 cm	143-4-757
CA04	22 – 42 cm	143-4-765*

\* L'appareil est fourni avec un brassard standard.

Fixez le brassard à l'appareil en introduisant l'embout (clic) dans l'orifice situé sur le côté gauche de l'appareil (voir figure 2).

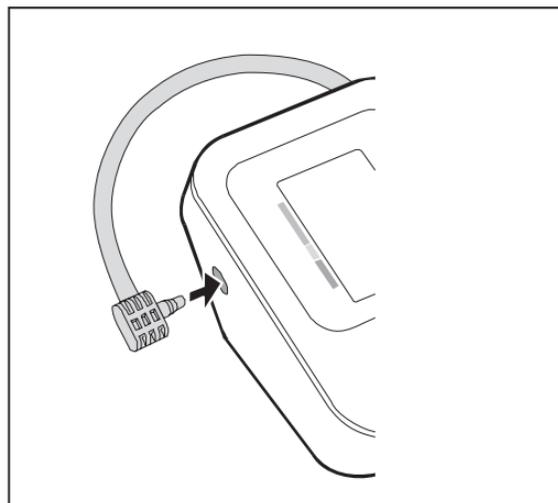


Figure 2

# Préparation de la mesure de la tension artérielle

**Les instructions suivantes doivent être respectées lors de la mesure de la tension artérielle :**



Évitez de consommer de la nicotine ou du café une heure avant la mesure de la tension artérielle.



Veillez à adopter une position assise confortable. Adossez-vous et posez les bras sur la table. Ne croisez pas vos jambes. Posez les pieds à plat sur le sol.

Détendez-vous pendant 5 minutes avant de réaliser la mesure. Ne bougez pas pendant la mesure.

## Pose du brassard

La mesure doit être réalisée sur le bras supérieur dénudé.



Si vous portez un vêtement étroit, vérifiez que le bras n'est pas comprimé sous la manche relevée (si nécessaire, retirez le vêtement avant la mesure).

➔ Passez le brassard ouvert en forme d'anneau sur le bras jusqu'à ce que le bord inférieur du brassard se trouve à environ 2-3 cm du coude. Positionnez le brassard de manière à aligner le repère avec l'artère (voir figure 3).

## Préparation de la mesure de la tension artérielle

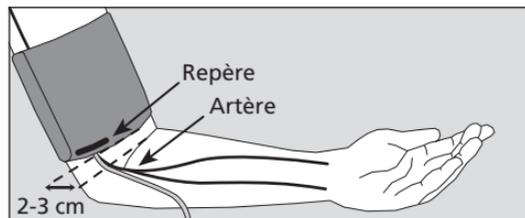


Figure 3

⚠ Le brassard ne doit pas être posé sur des plaies, car il pourrait entraîner d'autres blessures.

⚠ Vérifiez que le bras sur lequel est posé le brassard ne présente aucune artère ni veine en traitement médical présent ou passé (exemple : shunt).

⚠ Chez les femmes qui ont subi une amputation de la poitrine, le brassard ne doit pas être posé sur le côté amputé.

⚠ Pendant la mesure, des dysfonctionnements peuvent apparaître sur les appareils médicaux utilisés simultanément sur le même bras.

⚠ Le bras ne doit pas être trop comprimé. L'espace entre le bras et le brassard doit permettre de passer deux doigts.

⚠ La boucle métallique ne doit **jamais** reposer sur l'artère (voir figure 3) car il pourrait en résulter des mesures erronées.

➔ Tirez l'extrémité du brassard insérée dans la boucle et rabattez-la vers l'extérieur autour du bras. Une légère pression permet de faire adhérer la bande Velcro.

## Préparation de la mesure de la tension artérielle

➔ Posez le bras avec le brassard de manière détendue et légèrement incliné sur la table : le brassard doit se trouver à hauteur du cœur.

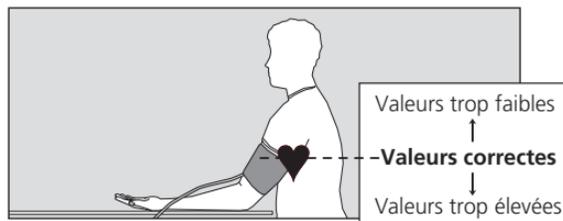


Figure 4



Ne parlez pas pendant la mesure de la tension.

**⚠** Vérifiez pendant la mesure que le flexible d'air n'est pas comprimé. La congestion sanguine qui en résulterait peut entraîner des blessures.

**⚠** Le flux sanguin ne doit pas être interrompu trop longtemps par la mesure de la tension artérielle (> 2 minutes). En cas de dysfonctionnement de l'appareil, retirez le brassard du bras.

**⚠** Des mesures trop fréquentes sont mauvaises pour la circulation sanguine et peuvent entraîner des lésions.

## Mesure de la tension artérielle

- ➔ Démarrez la mesure en appuyant sur la touche Marche



- ⚠ Immobilisez totalement votre bras et ne parlez pas.

Pour un essai de fonctionnement, tous les organes de l'afficheur LCD s'affichent brièvement (voir figure 5).

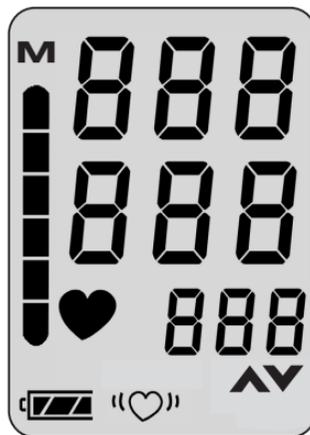


Figure 5



## Mesure de la tension artérielle

La pompe commence à remplir le brassard. L'appareil présente une fonction de gonflement automatique et intelligente qui garantit une montée en pression adaptée. La pression croissante du brassard est montrée sous forme numérique et sous forme de barres sur le bord gauche de l'écran.

Lorsque la **pression requise** est atteinte, la pompe se désactive et l'air se libère doucement du brassard.

FR

### Interruption de la mesure :

Une mesure peut être interrompue à tout moment lorsque vous appuyez sur la touche Marche au cours d'une mesure. Le brassard se dégonfle alors automatiquement.

Pendant la phase de mesure, la baisse de la pression du brassard et le symbole  clignotant sont affichés (voir figure 6).



Figure 6

## Affichage des valeurs mesurées

À la fin de la mesure, la valve intégrée s'ouvre automatiquement pour un dégonflement rapide du brassard.

Les valeurs mesurées (Systole, Diastole, Pouls) sont affichées (voir figure 7).



Figure 7

Si après la mesure, le symbole « «♥» » s'affiche, une répétition de la mesure est recommandée. Pendant cette seconde mesure, veillez à garder le bras totalement immobile. L'affichage répété du symbole « «♥» » alors que le bras est parfaitement immobile peut être le signe d'une arythmie. Parlez-en à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

La tension artérielle est une grandeur dynamique qui peut varier en fonction du maintien du patient, notamment la position assise, debout ou allongée, un mouvement avant ou pendant la mesure, l'état physique général du patient (stress, maladie, etc.).

➔ Si le résultat est manifestement faux, répétez la mesure.

## Affichage des valeurs mesurées

---

Au bout d'une minute environ, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour répéter une mesure, appuyez de nouveau **brièvement** sur la touche Marche.



Attendez au minimum 2 minutes entre deux mesures.

➔ Si aucune autre mesure n'est nécessaire, retirez le brassard de votre bras.

FR

## Installer l'application et établir la communication



Nécessite une interaction avec boso-App



Nécessite une interaction avec boso medicus system

Afin de permettre l'échange de données entre l'appareil de mesure de la tension et votre portable, vous devez procéder de la manière suivante :



- Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre portable. (Bluetooth 4.0 doit être disponible).

- Téléchargez l'application boso depuis Google/Apple Store.




FR

À l'installation de l'application, pour des raisons inhérentes au système, l'autorisation d'accès du site actuel sera demandée. Répondre « OUI » pour éviter des erreurs lors de la connexion BT.

# Installer l'application et établir la communication



- Lancez l'application boso sur votre portable.
- Créez un nouveau compte utilisateur :
  1. Sélectionnez « Utilisateur » dans le menu principal.
  2. Sélectionnez « + Nouveau » dans la barre de menu du bas.
  3. Saisissez vos données personnelles. Les champs obligatoires sont signalés par un « \* ».
  4. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » dans la barre de menu du bas pour enregistrer les données saisies.
- Sélectionnez l'utilisateur pour lequel les valeurs mesurées doivent être enregistrées en cochant.

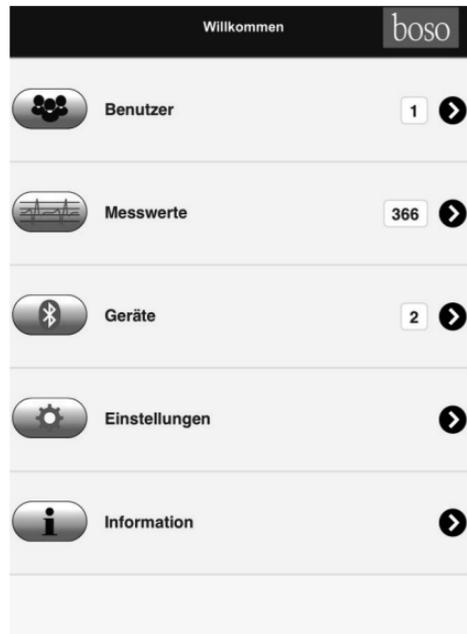

# Installer l'application et établir la communication



- Cliquez sur le bouton « Précédent » dans la barre de menu du haut pour revenir au menu principal.
- Dans le menu principal, sélectionnez « Appareils ».



- Appuyez sur la touche START de l'appareil de mesure de la tension et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « Pr » apparaisse à l'écran. Le voyant de communication reste affiché pendant environ une minute.



- Dans le menu « Appareils » dans la barre de menu du bas, sélectionnez « Ajouter un nouvel appareil ».



Si vous utilisez iOS, vous devez valider la requête de connexion en sélectionnant « Connexion ».



- La date et l'heure sont automatiquement synchronisées par le portable.



- Après que la connexion ait réussi, le mot « Fin » apparaîtra sur l'écran de l'appareil et l'appareil sera affiché dans la liste des appareils de l'application.

L'installation est terminée. Sélectionnez « Précédent » dans la barre de menu du haut pour quitter le menu.

## Installer l'application et établir la communication

Après avoir **remplacé la batterie**, vous devez connecter de nouveau le tensiomètre à l'appareil mobile car l'heure a été supprimée.

Si vous ne le faites pas, l'heure système actuelle de l'appareil mobile sera enregistrée comme estampille temporelle pour les mesures au moment du transfert des données.

Procéder de la manière suivante :

- Supprimer le tensiomètre de la liste des appareils de l'application
- Supprimer le tensiomètre des paramètres Bluetooth de l'appareil mobile
- Connecter de nouveau le tensiomètre comme décrit.

## Mesure de la tension et transfert des données

Posez le brassard et prenez la tension comme décrit dans le mode d'emploi.



Tant que Bluetooth est actif et que l'application est ouverte, les valeurs mesurées sont transférées automatiquement après la mesure.



Après avoir été correctement transférée, la valeur mesurée est supprimée de la mémoire de l'appareil de mesure de la tension.



Si les données n'ont pas été transférées, activez de nouveau la connexion. Lorsque l'application ou Bluetooth sont inactifs, jusqu'à 30 mesures sont enregistrées automa-

tiquement dans l'appareil de mesure de la tension (Si la mémoire est pleine (30 mesures), la mesure la plus ancienne est supprimée et la dernière mesure est enregistrée. Les erreurs de mesure ne sont pas enregistrées) et transférées à la fin de la mesure suivante après activation de l'application.

Pour transmettre à l'application toutes les mesures enregistrées dans la mémoire du système médical, l'application de toutes les mesures doit avoir été activée dans le menu « Paramètres » (réglage par défaut). Si la touche « Dernière » est sélectionnée, seule la dernière

# Mesure de la tension et transfert des données

mesure sera transférée et toutes les mesures enregistrées seront supprimées.

Dans ce menu, les heures de l'évaluation du matin et de celle de l'après-midi peuvent être modifiées.

Sélectionnez le bouton « Enregistrer » dans la barre de menu du bas pour enregistrer vos paramètres.

« bosogramm system » est prévu pour une balance.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) screen. At the top, there is a 'Zurück' (Back) button, the title 'Einstellungen', and the 'boso' logo. The main content is organized into three sections:

- Allgemeine Einstellungen**: Contains two time input fields: 'Beginn Vormittag Auswertung' set to '00:00' and 'Beginn Nachmittag Auswertung' set to '12:00'.
- bosomedic system**: Contains a 'Messwertübernahme' (Measurement Transfer) section with two buttons: 'letzter' (last) and 'alle' (all). The 'alle' button is highlighted with a dark background and is circled in red.
- bosogramm system**: Contains a 'Modus' (Mode) section with two buttons: 'singleuser' and 'multiuser'. The 'multiuser' button is highlighted with a dark background.

At the bottom, there is a dark navigation bar with two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) with a back arrow icon and 'Speichern' (Save) with a save icon.

# Évaluation et envoi des données




Toutes les mesures transférées jusqu'ici sont affichées dans le menu « Mesures ».

En sélectionnant le bouton « Graphiques » dans la barre de menu du bas, vous obtenez une présentation des mesures sous forme de graphique.

Pour sélectionner les graphiques disponibles, sélectionnez les boutons « SYS/ DIA » et « PULS » dans le haut de l'écran. Touchez le graphique pour l'agrandir ou le réduire.

« kg/IMC » est prévu pour une balance.

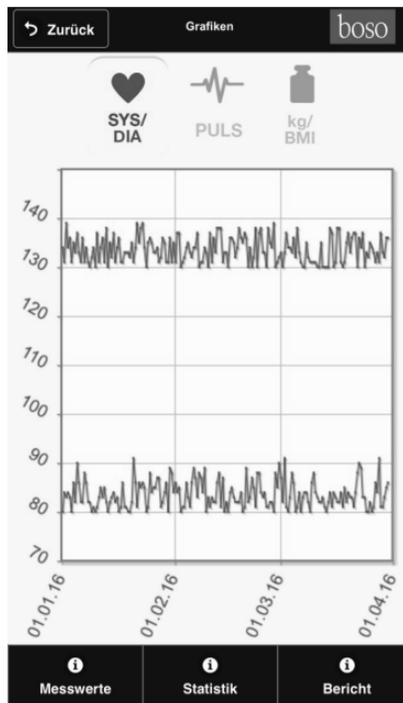

## Évaluation et envoi des données



En sélectionnant le bouton « Statistiques » dans la barre de menu du bas, vous obtenez un récapitulatif des mesures. Vous pouvez sélectionner la période de ce récapitulatif (date de/à).

En sélectionnant le bouton « Compte rendu » dans la barre de menu du bas, vous accédez au menu d'envoi des mesures. Le récapitulatif peut être envoyé par e-mail au format PDF ou XML.

Les fichiers XML peuvent être lus dans le programme « boso profil-manager XD Home ».

Ce programme propose d'autres possibilités d'évaluation. Il est disponible gratuitement sur Internet (<http://www.boso.de/download/profilmanagerXDHome/>).

→ Zurück Bericht boso

An:  
Q

Kopie:  
Q

Email  
Text:  
[Large text area]

Als XML senden Als PDF senden

# Suppression de mesures



Il est possible de supprimer des mesures sélectionnées ou datant de plus de 1/3/6/12 mois dans le menu « Mesures ». Sélectionnez pour cela le bouton « Supprimer » dans la barre de menu du bas. Attention : les données seront définitivement supprimées. N'oubliez pas d'archiver vos données en temps voulu en créant un fichier XML ou PDF (barre de menu « Compte rendu »).

	SYS	DIA	PUL	Arr	kg	
30.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,7	<input checked="" type="checkbox"/>
30.03.2016 18:00:00	136	86	66	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,5	<input type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	136	85	68	-	-	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,8	<input checked="" type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	132	83	67	-	-	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,7	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	133	81	65	-	-	<input type="checkbox"/>
28.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,9	<input type="checkbox"/>



## Alimentation secteur

---

Sur l'arrière de l'appareil se trouve une douille de connexion pour le transformateur. Utilisez si nécessaire le transformateur boso (**référence 410-7150**). Ce transformateur est réglé sur la tension de l'appareil, stabilisé et correctement polarisé. Des transformateurs différents peuvent endommager l'électronique et entraînent la perte de la garantie usine. En outre, l'utilisation d'un autre bloc d'alimentation peut entraîner un risque d'incendie.

A small square icon with a dark background and a white circle containing the letters 'FR' in white.

## Messages d'erreur

Si un problème se présente pendant la mesure de la tension, l'écran affiche un message d'erreur à la place du résultat de la mesure.

Signification des messages d'erreur :

	Signification du message <b>Err</b> :	Solution :
	Variation excessive de la tension du brassard pendant la mesure	Maintenir le bras immobile
	Lecture impossible des pulsations	Contrôler la position du brassard (voir page 105) et répéter la mesure.
	Différence systole – diastole trop faible : systole – diastole $\leq 10$ mmHg	Contrôler la position du brassard voir page 105) et répéter la mesure.
	Erreur lors du gonflage	Contrôler que le brassard n'est pas trop lâche, le resserrer si nécessaire (voir page 105).

## Messages d'erreur

Signification du message **Err** :      Solution :



La valeur de pulsation n'a pu être déterminée correctement

Vérifier la position du brassard et répéter la mesure



Erreur interne

Retirez les piles et appuyez sur le bouton START brièvement. Remettez les piles dans le boîtier. Si l'erreur persiste, retournez l'appareil au fabricant pour réparation.



Affichage du symbole « "♥" »

Solution :

La répétition de la mesure est recommandée ; maintenir le bras parfaitement immobile. L'affichage répété du symbole « "♥" » alors que le bras est parfaitement immobile peut être le signe d'une arythmie. Parlez-en à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

## Messages d'erreur

Signification du message <b>Err</b> :	Solution :
 Erreur lors de la connexion Bluetooth	Retirez les piles et appuyez sur le bouton START brièvement. Remettez les piles dans le boîtier. Recommencez le processus de connexion. Si l'erreur persiste, retournez l'appareil au fabricant pour réparation.
	À l'installation de l'application, pour des raisons inhérentes au système, l'autorisation d'accès au site actuel sera demandée. Répondre « OUI » pour éviter des erreurs lors de la connexion BT.



## Nettoyage et désinfection

---

### **Nettoyage l'appareil :**

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.

### **Nettoyage Brassard :**

Pour enlever les petites taches sur le brassard, utilisez un liquide vaisselle classique.

### **Désinfection l'appareil :**

Pour désinfecter l'appareil et le brassard à l'aide d'un chiffon (durée d'action 5 minutes minium), nous vous conseillons d'utiliser le désinfectant antifect liquid (Schülke & Mayr). Pour désinfecter le brassard, nous vous recommandons la désinfection par pulvérisation. Il est tout particulièrement recommandé de régulièrement nettoyer et désinfecter le brassard, surtout lorsque l'appareil est utilisé par plusieurs utilisateur.

## Conditions de Garantie

Nous accordons une garantie d'usine de 3 ans à compter de la date d'achat. La date d'achat doit être attestée par la facture. Les articles défectueux seront éliminés gratuitement pendant la durée de la garantie. En cas d'utilisation de garantie, aucune prolongation de durée de garantie n'interviendra sur l'appareil entier mais uniquement pour les pièces remplacées.

De la garantie sont exclus les dommages dus à une usure normale ( par ex. bracelets ), au transport et les dommages causés par un maniement non approprié ( par ex. l'inobservation des instructions d'utilisation ) ou les dommages dus à des interférences par des personnes non autorisées .

Tout autre droit, à quelque titre juridique que ce soit ne peut être reconnu.

En cas de recours à la garantie d'usine, l'appareil doit être envoyé avec la facture originale à:

BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG,  
Bahnhofstr. 64, D-72417 Jungingen.

boso n'est en aucun cas responsable en cas de perte telles que problèmes de système ou perte de données qui peuvent survenir au cours de l'utilisation de cet appareil de mesure de la tension.

Il n'est pas garanti que cet appareil de mesure de la tension puisse se connecter avec tous les appareils Bluetooth compatibles.

## Service après-vente

### Service après-vente

Les interventions sous garantie ou les réparations doivent être confiées à un professionnel autorisé et formé. Ne pas modifier cet équipement sans l'autorisation du fabricant. Envoyez l'appareil soigneusement emballé avec un affranchissement suffisant à votre distributeur autorisé ou directement à :

FR

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG  
Serviceabteilung  
Bahnhofstraße 64, D-72417 Jungingen  
T: +49 (0) 74 77 / 92 75-0

## Élimination



L'appareil et les piles ne sont pas des déchets ménagers.

En fin de vie, l'appareil doit être rapporté à un point de collecte pour équipements électroniques.

Les piles classiques et rechargeables sont des déchets spéciaux. (à ramener au point de collecte de votre localité).

Durée de vie prévue de l'appareil : 5 ans (En utilisant l'appareil 6 fois par jour)

Durée de vie prévue du brassard : 2 ans (En utilisant l'appareil 6 fois par jour)

## Caractéristiques techniques

---

<b>Principe de mesure :</b>	oscillométrique
<b>Plages de mesure :</b>	systolique: 60 à 279 mmHg diastolique: 40 à 200 mmHg Pouls: 40 à 180 par minute
<b>Pression du brassard :</b>	0 à 299 mmHg
<b>Capacité de la mémoire :</b>	30 mesures
<b>Affichage :</b>	LCD
<b>Conditions d'utilisation :</b>	Température ambiante +10 °C à +40 °C Humidité relative de l'air 15 à 85 %
<b>Conditions de stockage :</b>	Température ambiante -20 °C à +60 °C Humidité relative de l'air 10 à 95 %
<b>Alimentation électrique :</b>	6 V CC (piles 4 x 1,5 V Mignon CEI LR 6, manganèse-alcaline) En option : Transformateur 6 V CC, référence 410-7-150



## Caractéristiques techniques

<b>Durée de vie habituelle des piles :</b>	500 cycles de mesure (sans tenir compte de l'intensité de pompage et de la fréquence d'utilisation)
<b>Contrôle des piles :</b>	Témoin de charge sur l'afficheur
<b>Poids :</b>	250 g (sans piles)
<b>Dimensions (L x h x l) :</b>	96 mm x 68 mm x 130 mm
<b>Classification :</b>	Classe de protection (□)
<b>Partie appliquée:</b>	Type BF (⚡)
<b>Protection contre les objets solides :</b>	IP 20
<b>Test clinique :</b>	La précision de mesure est conforme aux exigences de la norme ISO 81060 partie 2

FR

IT

## Caractéristiques techniques

---

<b>Bluetooth</b>	version Bluetooth 4.0
<b>Écart de pression maximal au niveau du brassard :</b>	$\pm 3$ mmHg
<b>Tolérance du dispositif de mesure du pouls :</b>	$\pm 5$ %
<b>Normes appliquées :</b>	DIN EN ISO 80601-2-30 „Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated type non-invasive sphygmomanometers“.

# Instructions relatives au contrôle technique de l'appareil

## (uniquement pour les techniciens formés)

Le contrôle technique – au plus tard tous les 2 ans – doit être réalisé par les organisations ou personnes suivantes :

- Fabricant
- Organismes responsables du contrôle de la mesure
- Personnes qui remplissent les conditions de la réglementation nationale en vigueur.

FR

### A) Essai de fonctionnement

Un essai de fonctionnement de l'appareil ne peut être effectué que sur une personne ou sur un simulateur approprié.

### B) Contrôle de l'étanchéité du circuit de pression et de l'affichage de la tension

#### Remarque :

- a) Si la tension en mode de mesure est supérieure à 299 mmHg, la soupape de dégonflement rapide ouvre le circuit de pression. Lorsque la pression en mode de contrôle est supérieure à 320 mmHg, la valeur mesurée affichée clignote.
- b) Pour la vérification de l'étalonnage, une prise de test spéciale doit être utilisée. La prise de test est disponible chez le fabricant moyennant un supplément.

# Instructions relatives au contrôle technique de l'appareil (uniquement pour les techniciens formés)

Une poire de gonflage doit en outre être ajoutée au circuit de pression.

(respectez la durée minimale d'application du brassard, soit 30 s) de manière habituelle.

## Vérification

- 1.) Retirez les piles.
- 2.) Appuyez et maintenez la pression sur la touche Marche et insérez les piles.
- 3.) Relâchez la touche Marche. L'appareil se trouve en mode de contrôle ; la tension actuelle est affichée dans les champs SYS et DIA.
- 4.) Contrôlez l'exactitude de l'affichage et l'étanchéité du circuit de pression
- 5.) Éteignez de nouveau l'appareil en appuyant sur la touche Marche.

# Indice

---

Descrizione dell'apparecchio .....	136
Dotazione di fornitura .....	137
Guida rapida .....	138
Introduzione .....	139
Destinazione d'uso .....	140
Valori pressori .....	141
Valori di pressione sistolica e diastolica .....	141
Valori limite OMS per la valutazione dei valori pressori .....	141
Messa in funzione dell'apparecchio .....	143
Inserimento delle batterie .....	143
Indicatore di carica delle batterie .....	144
Avvertenze generali per l'automisurazione della pressione arteriosa .....	145
Avvertenze generali sulla connessione Bluetooth .....	147
Preparazione alla misurazione della pressione arteriosa .....	149
Avvertenza sulla misura del bracciale .....	149
Come indossare il bracciale .....	150

# Indice

---

Misurazione della pressione arteriosa .....	153
Interruzione della misurazione .....	154
Visualizzazione dei valori pressori .....	155
Configurazione dell'app e creazione del collegamento .....	157
Misurazione e trasmissione della pressione arteriosa .....	161
Valutazione e invio delle misurazioni .....	163
Cancellazione dei valori .....	165
Utilizzo con la rete elettrica .....	166
Codici di errore .....	167
Pulizia e disinfezione .....	170
Condizioni di Garanzia .....	171
Servizio clienti / Smaltimento .....	172
Specifiche tecniche .....	173
Istruzioni per il controllo metrologico (solo per il personale specializzato addestrato) .....	176

## Descrizione dell'apparecchio



 Visualizzazione carica batterie

vedere pag. 144

 Misurazione in corso

vedere pag. 154

 Alterazioni del ritmo cardiaco durante la misurazione vedere pag. 155, 168

  **ATTENZIONE** I sacchetti di plastica possono essere pericolosi.  
Per evitare pericoli di soffocamento non lasciare questo  
sacchetto alla portata dei bambini

vedere custodia

 Comunicazione Bluetooth attiva

# Dotazione di fornitura

1 sfigmomanometro  
boso medicus system



4 batterie tipo LR 6 (AA)



1 bracciale universale  
CA 04



1 manuale di  
istruzioni



1 custodia



## Guida rapida

- ➔ Inserire le batterie, facendo attenzione alla polarità corretta (pag. 143)
- ➔ Collegare il bracciale allo sfigmomanometro (pag. 149)
- ➔ Applicare il bracciale sul braccio (pag. 150)
- ➔ Per avviare (e terminare) la misurazione, premere il pulsante Start (pag. 153)

L'apparecchio visualizza i valori di pressione sistolica, pressione diastolica e polso al termine della misurazione (pag. 155)



La presente guida rapida non sostituisce le informazioni dettagliate contenute nel Manuale di istruzioni per l'uso sicuro dello sfigmomanometro.



Legga quindi in ogni caso il manuale di istruzioni!

## Introduzione

Gentile cliente, la ringraziamo cordialmente per aver acquistato uno sfigmomanometro bosco. Bosco è simbolo di alta qualità e precisione ed è la marca di prima scelta anche tra i professionisti: attualmente, il 96% dei medici tedeschi utilizza sfigmomanometri bosco. Dall'esperienza decennale maturata nel settore professionista traggono vantaggio anche gli apparecchi destinati ai pazienti per l'automisurazione a domicilio.

Questo apparecchio ha superato i nostri rigidi controlli di qualità ed è un partner affidabile per il controllo dei valori pressori.

 Legga con attenzione il presente manuale di istruzioni prima del primo impiego, perché l'uso corretto dell'apparecchio è indispensabile per una misura-

zione corretta della pressione arteriosa. In questo manuale di istruzioni il simbolo "➡" indica un'azione effettuata dall'utente.

Per assistenza nella messa in funzione, nell'utilizzo e nella manutenzione dell'apparecchio, rivolgersi al proprio rivenditore o al produttore (i dati di contatto sono sul retro della copertina delle presenti istruzioni per l'uso).

Eventuali anomalie nel funzionamento o un evento che ha peggiorato o avrebbe potuto peggiorare lo stato di salute devono essere segnalati tempestivamente al produttore.

## Introduzione

In caso di cessione, all'apparecchio deve essere allegato il presente manuale di istruzioni.

Per l'utilizzo dell'apparecchio in medicina (in conformità alle norme sull'utilizzo dei prodotti medicali) devono essere effettuati controlli metrologici a intervalli regolari (vedere pag. 176).

Dispositivi di comunicazione wireless, come dispositivi elettrici wireless domestici, telefoni cellulari, telefoni cordless e le loro stazioni radio base, walkie-talkie, possono influenzare questo monitor della pressione arteriosa. Pertanto, deve essere mantenuta una distanza minima di 3,3 metri da tali dispositivi. Non telefonare con un telefono cellulare durante la misurazione della pressione sanguigna.

Questo apparecchio soddisfa la direttiva europea 93/42/CEE sui dispositivi medici.

Questo fatto è confermato dalla marcatura CE 0124. (Il numero identificativo 0124 rappresenta l'organismo accreditato DEKRA).

La trasmissione radio Bluetooth dell'apparecchio soddisfa la direttiva 1999/5/CE sulle telecomunicazioni.

### Destinazione d'uso

Rilevamento non invasivo del valore sistolico e diastolico della pressione sanguigna e la frequenza degli impulsi nell'uomo.

L'apparecchio può essere impiegato su un braccio di qualsiasi circonferenza come indicato sul bracciale.

## Valori pressori

Per determinare la pressione arteriosa si devono misurare **due valori**:

### ● **Pressione sistolica (massima)**

Dovuta alla contrazione del cuore che pompa il sangue nei vasi sanguigni.

### ● **Pressione diastolica (minima)**

Si presenta quando il cuore è disteso e si riempie nuovamente di sangue.

I valori di pressione arteriosa vengono espressi in mmHg (mm di mercurio).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato i seguenti valori limite per la valutazione della pressione arteriosa:

	Sistolica	Diastolica
Pressione arteriosa elevata (ipertensione)	da 140 mmHg	da 90 mmHg
Pressione arteriosa ancora nell'ambito della norma	da 130 a 139 mmHg	da 85 a 89 mmHg
Pressione arteriosa normale	da 120 a 129 mmHg	da 80 a 84 mmHg
Pressione arteriosa ottimale	fino a 119 mmHg	fino a 79 mmHg

## Valori pressori

La necessità di una terapia farmacologica viene stabilita non solo in base ai valori pressori, ma anche in base al profilo di rischio di ogni paziente. Consulti il medico se uno solo dei due valori (pressione sistolica, pressione diastolica) supera costantemente i valori limite che indicano una pressione arteriosa elevata.

I valori pressori determinati a domicilio sono spesso leggermente inferiori ai valori determinati dal medico. Per questo, la Lega tedesca contro l'ipertensione (Deutsche Hochdruckliga) ha stabilito valori limite inferiori per l'automisurazione a domicilio:

misurazione a domicilio:	135/85 mmHg
misurazione nello studio medico:	140/90 mmHg

## Messa in funzione dell'apparecchio

L'apparecchio deve essere installato e messo in funzione in base alle informazioni contenute in questo manuale.

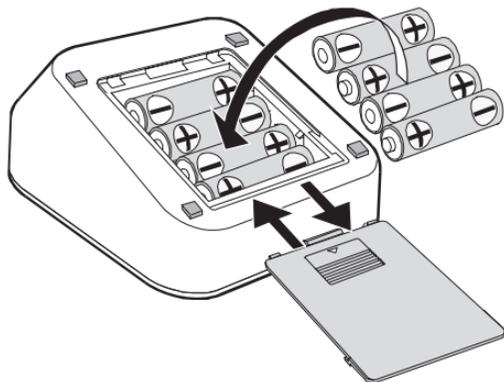


Fig. 1

- ➔ Utilizzare esclusivamente batterie di qualità anti-perdita del tipo indicato (vedere "Specifiche tecniche" a pag. 173).

**⚠** Non utilizzare **mai** contemporaneamente batterie vecchie e nuove o batterie di marche diverse.

**⚠** In caso di polarità errata l'apparecchio non funziona ed esiste il rischio di sviluppo di calore, perdite dalle batterie e danni permanenti all'apparecchio.

### ➔ Inserimento delle batterie

Il vano batterie è situato sulla parte inferiore dell'apparecchio. Inserire le batterie nel vano apposito, come indicato nella Fig. 1.

- ➔ Rimuovere le batterie nel caso l'apparecchio non venga utilizzato per periodi prolungati.

## Messa in funzione dell'apparecchio

L'apparecchio visualizza la carica delle batterie (vedere pag. 136)

-  Batterie completamente cariche.
-  Batterie parzialmente cariche.
-  Batterie da sostituire entro breve.
-  Lampeggiante! Non è possibile effettuare misurazioni.  
Sostituire le batterie.

### Come contribuire alla protezione dell'ambiente

Le batterie utilizzate e le batterie ricaricabili non devono essere gettate nei rifiuti domestici e possono essere consegnate ai centri di raccolta per batterie usate e rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al proprio comune di residenza.

## Avvertenze generali per l'automisurazione della pressione arteriosa

1. Le oscillazioni dei valori pressori sono normali. Anche in caso di misurazione ripetuta possono verificarsi oscillazioni notevoli. Le misurazioni isolate o effettuate a intervalli irregolari non forniscono dati affidabili sui valori pressori reali.  
Una valutazione affidabile è possibile solo effettuando misurazioni a intervalli regolari e nelle stesse condizioni e riportando i valori nell'apposito diario della pressione arteriosa.
2.  L'automisurazione della pressione arteriosa non costituisce una terapia. Non modifichi per **nessuna** ragione la posologia dei medicinali prescritta dal medico.
3. Le alterazioni del ritmo cardiaco possono compromettere la precisione dell'apparecchio e dare luogo a misurazioni errate (vedere pag. 168).
4. Nei pazienti con polso debole (ad es. nei portatori di pace-maker) possono verificarsi misurazioni errate. Lo sfigmomanometro non influisce in alcun modo sui pace-maker.
5. Consultare il medico prima di utilizzare lo sfigmomanometro in gravidanza.
6. La misurazione deve sempre essere effettuata in condizioni di riposo. Si consiglia di misurare la pressione arteriosa due volte al giorno: al mattino al risveglio e alla sera, dopo essersi rilassati dopo la giornata di lavoro.

## Avvertenze generali per l'automisurazione della pressione arteriosa

---

7. Salvo controindicazioni (vedere pag. 151), la pressione arteriosa deve sempre essere misurata sul braccio che presenta i valori pressori più elevati. Occorre quindi determinare una volta la pressione su entrambe le braccia e, in seguito, sempre sul braccio che presenta i valori pressori più elevati.

## Avvertenze generali sulla connessione Bluetooth

-  Lo sfigmomanometro non deve essere impiegato in luoghi nei quali la comunicazione senza fili è vietata, ad esempio nei velivoli o negli ospedali. Questo sfigmomanometro può avere degli effetti dannosi sugli apparecchi elettronici o sugli apparecchi elettronici medici.
- La distanza di comunicazione massima tra sfigmomanometro e ricevitore è pari a circa 10 metri. Questa distanza può ridursi a seconda dell'ambiente circostante; verificare pertanto che la distanza sia sufficientemente breve per consentire la trasmissione dei dati dopo la misurazione.
- Accertare che lo spazio tra lo sfigmomanometro e il dispositivo mobile non sia edificato. La distanza di comunicazione può essere ridotta dalla struttura edile dell'edificio o da altri ostacoli. In determinate circostanze la comunicazione potrebbe risultare impossibile, in particolare in presenza di muri di calcestruzzo armato, ecc.
- La funzione Bluetooth, durante l'accoppiamento, deve essere disattivata in tutti gli altri apparecchi presenti entro la portata.
- Nel caso improbabile in cui lo sfigmomanometro disturbi degli altri dispositi-

## Avvertenze generali sulla connessione Bluetooth

---

tivi di comunicazione senza fili, impiegare lo sfigmomanometro in un altro luogo.

- Non impiegare la connessione Bluetooth nei pressi di un apparecchio WLAN IEEE802.11g/b/n o di altri impianti di comunicazione senza fili (soprattutto nella gamma dei 2,4 GHz) ovvero nei pressi di apparecchi che emettono onde elettromagnetiche (ad esempio gli apparecchi a microonde). Questo potrebbe causare l'interruzione frequente della connessione, la riduzione notevole della velocità di comunicazione e l'insorgenza di errori.

## Preparazione alla misurazione della pressione arteriosa

**!** L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con i seguenti bracciali scelti in base alla circonferenza del proprio braccio, che è riportata anche sul bracciale stesso.

Tipo	Circonferenza del braccio	Numero d'ordine
CA01	22 – 32 cm	143-4-764
CA02	32 – 48 cm	143-4-757
CA04	22 – 42 cm	143-4-765*

\* Bracciale universale compreso nella fornitura standard.

Collegare il bracciale all'apparecchio inserendo la spina (fino allo scatto) nella presa situata sul lato sinistro dell'apparecchio. (vedere Fig. 2).

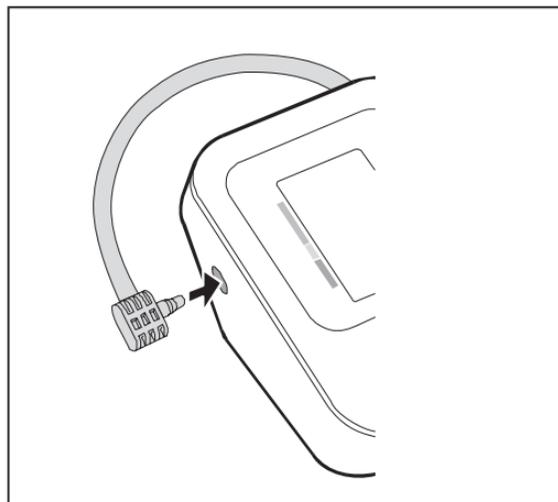


Fig. 2

## Avvertenza sulla misura del bracciale

### Aspetti da ricordare durante la misurazione della pressione arteriosa



Evitare il consumo di nicotina e caffè un'ora prima della misurazione.



Sedersi in posizione comoda, con schiena e braccia appoggiate. Non accavallare le gambe. Appoggiare la pianta dei piedi sul pavimento. Rilassarsi per 5 minuti prima di misurare la pressione. Evitare di muoversi durante la misurazione.

### Come indossare il bracciale

Effettuare la misurazione sul braccio nudo.



Se si indossano abiti aderenti, fare attenzione a ribaltare le maniche senza stringere il braccio (se necessario, togliere l'indumento prima della misurazione).

- ➔ Spingere il bracciale aperto ad anello sul braccio, fino a che il margine inferiore del bracciale venga a trovarsi circa 2-3 cm sopra la piega del gomito. Il bracciale deve essere posizionato in modo tale che la linea di marcatura venga a trovarsi sopra l'arteria (vedere Fig. 3).

## Avvertenza sulla misura del bracciale

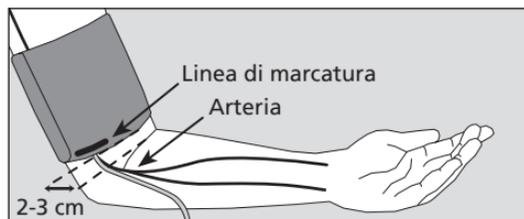


Fig. 3

⚠ Per evitare ulteriori lesioni, il bracciale non deve essere posizionato in corrispondenza di ferite.

⚠ Non posizionare il bracciale su un braccio nel quale le arterie o le vene sono o sono state oggetto di trattamento (ad es. fistola).

⚠ Per le donne che hanno subito l'amputazione di un seno: non applicare il bracciale sul lato dell'amputazione.

⚠ Durante la misurazione possono verificarsi disfunzioni degli apparecchi medicali utilizzati contemporaneamente sullo stesso braccio.

⚠ Il bracciale non deve essere stretto in modo eccessivo: tra il braccio e il bracciale devono ancora poter passare circa due dita.

⚠ Non posizionare **mai** l'anello metallico sopra l'arteria (vedere Fig. 3); in caso contrario, i valori pressori possono risultare falsati.

➔ Inserire la parte terminale del bracciale nell'anello metallico e farla passare verso l'esterno, avvolgendo il braccio. Chiudere bene la chiusura a velcro premendo leggermente.

## Avvertenza sulla misura del bracciale

➔ Dopo aver applicato il bracciale, appoggiare il braccio sul tavolo, tenendolo rilassato e leggermente piegato, in modo che il bracciale si trovi all'altezza del cuore.

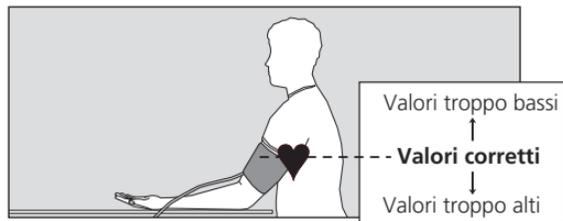


Fig. 4

**⚠** Fare attenzione a non piegare il tubo dell'aria durante la misurazione. Il ristagno di sangue che ne deriva può causare lesioni.

**⚠** La misurazione non deve interrompere il flusso sanguigno per tempi eccessivamente lunghi (oltre 2 minuti). In caso di funzionamento difettoso dell'apparecchio, togliere il bracciale dal braccio.

**⚠** Le misurazioni troppo frequenti possono ostacolare il flusso sanguigno e quindi provocare lesioni.

IT



Non parlare durante la misurazione.

## Misurazione della pressione arteriosa

- ➔ Avviare la misurazione premendo il pulsante Start



- ⚠ Tenere il braccio immobile e non parlare.

Per il controllo funzionale dell'apparecchio verranno visualizzati brevemente tutti gli elementi dello schermo LCD (vedere Fig. 5).

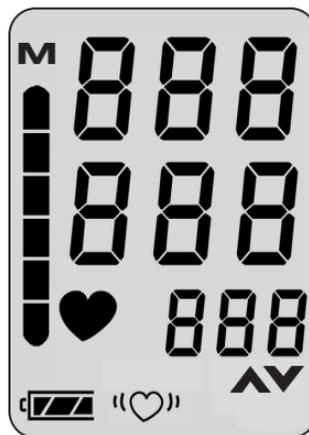


Fig. 5



## Misurazione della pressione arteriosa

La pompa inizia a gonfiare il bracciale.

L'apparecchio è dotato di un automatismo di gonfiaggio "intelligente", che assicura un gonfiaggio atraumatico fino alla corretta pressione di gonfiaggio. La pressione crescente del manicotto viene visualizzata sotto forma di valore numerico digitale e di barre sul bordo sinistro dello schermo.

Quando la **corretta pressione di gonfiaggio** è stata raggiunta, la pompa si ferma e l'aria fuoriesce lentamente dal bracciale.

IT

### Interruzione della misurazione

La misurazione può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il pulsante Start, che permette di sgonfiare automaticamente il bracciale.

Durante la fase di misurazione vengono visualizzati la pressione di gonfiaggio decrescente e il simbolo  lampeggiante (vedere Fig. 6).



Fig. 6

## Visualizzazione dei valori pressori

Al termine della misurazione, la valvola integrata si apre automaticamente e il bracciale si sgonfia rapidamente.

L'apparecchio visualizza i valori pressori misurati (pressione sistolica, pressione diastolica, polso) (vedere Fig. 7).

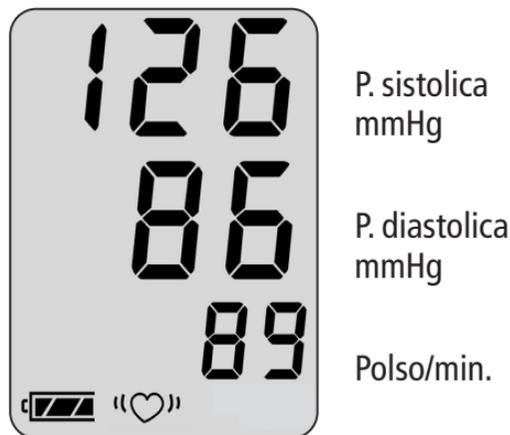


Fig. 7

Se dopo la misurazione viene visualizzato il simbolo "♥", si consiglia di ripetere l'operazione tenendo il braccio immobile. La visualizzazione ripetuta del simbolo "♥", nonostante la misurazione sia stata effettuata con il braccio fermo, può essere un segno di alterazioni del ritmo cardiaco. Consulti il medico in occasione della prossima visita.

La pressione arteriosa è una grandezza dinamica che può variare a seconda della posizione del paziente (posizione seduta, eretta o coricata), di movimenti effettuati prima o durante la misurazione e delle condizioni di salute generali (stress, malattia ecc.).

➔ In caso di valori pressori chiaramente errati, ripetere la misurazione.



## Visualizzazione dei valori pressori

---

Dopo circa 1 minuto l'apparecchio si spegne automaticamente. Per ripetere la misurazione premere di nuovo **brevemente** il pulsante Start.



Rispettare un intervallo di almeno due minuti tra due misurazioni successive.

- ➔ Se non si effettuano ulteriori misurazioni, rimuovere il bracciale dal braccio.

## Configurazione dell'app e creazione del collegamento



Richiede l'interazione con boso-App



Richiede l'interazione con boso medicus system

Al fine di consentire lo scambio dei dati tra lo sfigmomanometro e il proprio dispositivo mobile è necessario osservare i passi seguenti:



- Accertare che la funzione Bluetooth sia attiva sul proprio dispositivo mobile. (Il requisito preliminare è la disponibilità del Bluetooth 4.0)

- Scaricare l'app boso da Google/Apple Store.




Al momento dell'installazione della app il sistema chiede obbligatoriamente il permesso all'accesso dell'ubicazione attuale. Rispondere "Sì" a questa domanda per evitare errori nel collegamento BT.

# Configurazione dell'app e creazione del collegamento



- Avviare l'app boso sul proprio dispositivo mobile.
- Creare un nuovo utente:
  1. Selezionare "Utente" nel menù principale.
  2. Selezionare "+ Nuovo" nella barra del menù inferiore.
  3. Immettere i propri dati personali. I campi obbligatori sono contrassegnati con "\*".
  4. Salvare i dati mediante il pulsante "Salvare" nella barra del menù inferiore.
- Contrassegnare con un segno di spunta l'utente per cui si desiderano salvare i valori.

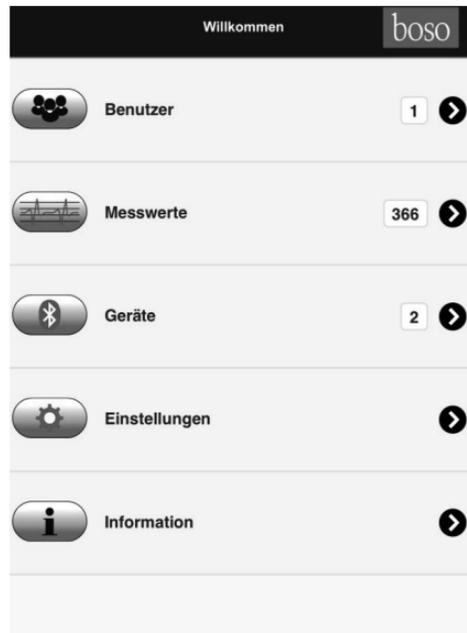

## Configurazione dell'app e creazione del collegamento



- Mediante il pulsante "Indietro" nella barra del menù superiore tornare al menù principale.
- Nel menù principale aprire "Apparecchi".



- Premere il tasto START sullo sfingomanometro fino a che sullo schermo compare "Pr". La visualizzazione di comunicazione sarà visualizzata sullo schermo per circa un minuto.



- Scegliere "Aggiungi nuovo apparecchio" nel menù "Apparecchi" nella barra del menù inferiore.



Con iOS la richiesta di accoppiamento deve anche essere confermata con "Accoppiare".



- Data e ora vengono sincronizzate automaticamente con quelle del dispositivo mobile.



- Dopo l'avvenuto accoppiamento, sullo schermo dell'apparecchio compare <End>; l'apparecchio viene visualizzato nell'elenco di apparecchi dell'app.

La configurazione è così conclusa. Uscire dal menù tramite il pulsante "Indietro" nella barra del menù superiore.

## Configurazione dell'app e creazione del collegamento

**Dopo la sostituzione della batteria**, lo sfigmomanometro deve essere nuovamente accoppiato con il dispositivo mobile perché la sostituzione della batteria cancella le informazioni temporali.

Se non si ripete l'accoppiamento, nella trasmissione dati viene salvata per i valori misurati l'ora attuale del sistema del dispositivo mobile.

Procedere come segue:

- Cancellare lo sfigmomanometro dalla lista dei dispositivi della app
- Cancellare lo sfigmomanometro dalle impostazioni Bluetooth del dispositivo mobile
- Eseguire di nuovo l'accoppiamento come descritto.

## Misurazione e trasmissione della pressione arteriosa

Applicare il bracciale ed eseguire la misurazione della propria pressione arteriosa come descritto in queste istruzioni per l'uso.



I valori misurati saranno trasmessi automaticamente al termine della misurazione fino a che la funzione Bluetooth è attiva e l'app è avviata.



A trasmissione avvenuta, il valore viene cancellata dalla memoria dei valori misurati dello sfigmomanometro.



Se i dati della misurazione non fossero stati trasmessi, eseguire nuovamente l'accoppiamento. Se l'app o il Bluetooth sono inattivi, lo sfig-

momanometro memorizza automaticamente fino a 30 valori (Se la memoria dei valori misurati è piena (30 misurazioni), la misurazione più obsoleta viene cancellata e viene salvata la misurazione attuale; le misurazioni errate non vengono salvate) che saranno trasmessi con la misurazione successiva dopo l'attivazione dell'app.

Per poter trasmettere all'app tutti i valori salvati nella memoria del sistema medicus, nel menù "Impostazioni" deve essere attivata l'acquisizione di tutti i valori (impostazione standard). Qualora qui venga scelto "Ultimo", sarà trasmesso e cancellato sempre e


# Misurazione e trasmissione della pressione arteriosa

solo l'ultimo valore misurato e tutti i valori misurati salvati in precedenza saranno cancellati.

In questo menù si possono anche modificare gli orari per la valutazione antimeridiana e pomeridiana.

Salvare le proprie impostazioni mediante il pulsante "Salvare" nella barra del menù inferiore.

"bosogramm system" è previsto per una bilancia.

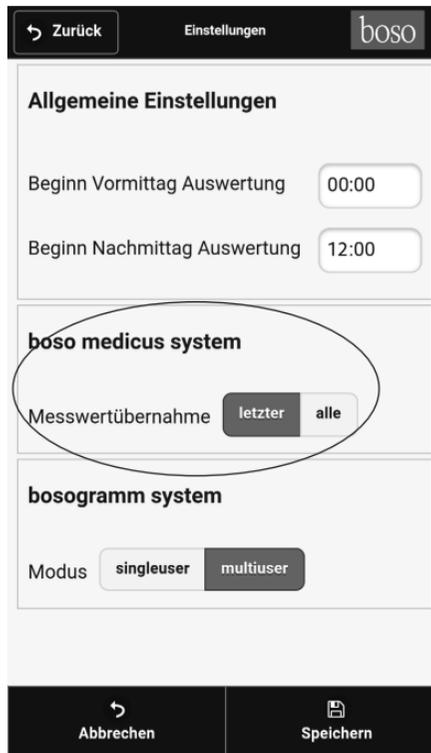

← Zurück      Einstellungen      bosomedic

**Allgemeine Einstellungen**

Beginn Vormittag Auswertung      00:00

Beginn Nachmittag Auswertung      12:00

**bosomedic system**

Messwertübernahme      letzter      alle

**bosogramm system**

Modus      singleuser      multiuser

↩ Abbrechen      💾 Speichern

# Valutazione e invio delle misurazioni




Nel menù "Valori misurati" sono visualizzati tutti i valori trasmessi fino a quel momento.

Tramite il pulsante "Grafici" nella barra del menù inferiore si visualizza la rappresentazione grafica dei valori misurati.

Con i pulsanti nella parte alta dello schermo "SYS/DIA", "PULS", è possibile visualizzare i grafici disponibili. Cliccare sul grafico per ingrandirlo o rimpicciolirlo.

Il pulsante "kg/BMI" è previsto per una bilancia.

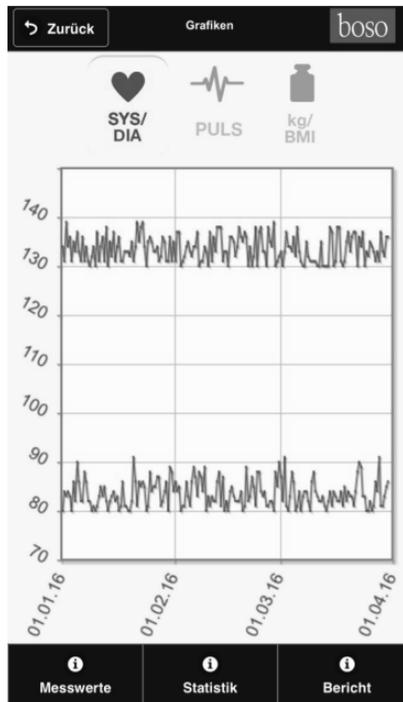

## Valutazione e invio delle misurazioni



Tramite il pulsante "Statistiche" nella barra del menù inferiore è possibile creare un riepilogo statistico dei valori misurati. Sempre qui possono essere selezionati i limiti del riepilogo (data da/a).

Tramite il pulsante "Relazione" nella barra del menù inferiore si raggiunge il menù per inviare i valori il cui riepilogo può essere trasmesso via e-mail in formato PDF o XML. Il file XML può essere letto nel programma per PC "boso profilmanager XD Home". Questo programma offre ulteriori possibilità di valutazione ed è disponibile in internet (<http://www.boso.de/download/profilmanagerXDHome/>) a titolo gratuito.

The screenshot shows a mobile application interface for sending reports. At the top, there is a dark header bar with a back arrow and the text "Zurück" on the left, "Bericht" in the center, and the "boso" logo on the right. Below the header, there are three input fields for email recipients: "An:", "Kopie:", and "Email Text:". Each of the first two fields has a magnifying glass icon on the left. The "Email Text:" field is a large, empty text area. At the bottom, there are two buttons: "Als XML senden" and "Als PDF senden", each with an envelope icon above the text.

# Cancellazione dei valori



Tramite il pulsante "Cancellare" nella barra del menù inferiore è possibile eliminare singoli valori o valori che si trovano nel menù "Valori misurati" da più di 1/3/6/12 mesi.

Attenzione, i dati vengono cancellati in modo irreversibile. Vi ricordiamo di effettuare regolarmente il backup dei dati creando un file XML o PDF attraverso il pulsante "Rapporto".

	SYS	DIA	PUL	Arr	kg	
30.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,7	<input checked="" type="checkbox"/>
30.03.2016 18:00:00	136	86	66	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,5	<input type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	136	85	68	-	-	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,8	<input checked="" type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	132	83	67	-	-	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,7	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	133	81	65	-	-	<input type="checkbox"/>
28.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,9	<input type="checkbox"/>



## Utilizzo con la rete elettrica

---

Sulla parte posteriore dell'apparecchio si trova la presa per l'alimentatore di rete. Nel caso, utilizzare esclusivamente l'alimentatore bosch (**N. d'ordine 410-7-150**). Questo alimentatore fornisce la tensione corretta, è stabilizzato ed è dotato della giusta polarità. Gli alimentatori di altre marche possono danneggiare le componenti elettroniche dell'apparecchio, con conseguente perdita della garanzia. Inoltre, gli alimentatori di altre marche possono comportare un rischio di incendio.

## Codici di errore

Qualora si verificano problemi durante la misurazione, l'apparecchio visualizza un codice di errore anziché i valori pressori.

### Significato dei codici di errore

	Causa del codice di errore <b>Err</b> :	Risoluzione del problema
	La pressione all'interno del bracciale oscilla eccessivamente durante la misurazione	Tenere il braccio fermo
	Assenza di pulsazioni analizzabili	Verificare la posizione del bracciale (vedere pag. 149) e ripetere la misurazione
	Differenza p.sistolica – p. diastolica insufficiente: p. sistolica – p. diastolica $\leq 10$ mmHg	Verificare la posizione del bracciale (vedere pag. 149) e ripetere la misurazione
	Errore di gonfiaggio	Il bracciale potrebbe essere troppo largo; stringere il bracciale (vedere pag. 149)



## Codici di errore

Causa del codice di errore <b>Err</b>	Risoluzione del problema
 Il valore della pulsazione non può essere correttamente determinato	Controllare la posizione del bracciale e ripetere la misurazione.
  Errore interno	Togliere le batterie e premere brevemente il pulsante START. Rimettere le batterie nello strumento. Se l'errore persiste, rendere lo strumento al produttore per la riparazione
 Visualizzazione del simbolo "♥"	Risoluzione del problema Si consiglia di ripetere la misurazione tenendo il braccio immobile. La visualizzazione ripetuta del simbolo "♥", nonostante la misurazione sia stata effettuata con il braccio fermo, può essere un segno di alterazioni del ritmo cardiaco. Consulti il medico in occasione della prossima visita.

## Codici di errore

Causa del codice di errore <b>Err</b>	Risoluzione del problema
 Errore nella connessione Bluetooth	Togliere le batterie e premere brevemente il pulsante START. Rimettere le batterie nello strumento. Eseguire nuovamente l'accoppiamento. Se l'errore persiste, rendere lo strumento al produttore per la riparazione
	Al momento dell'installazione della app il sistema chiede obbligatoriamente il permesso all'accesso dell'ubicazione attuale. Rispondere "Sì" a questa domanda per evitare errori nel collegamento BT.



## Pulizia e disinfezione

---

### **Pulizia Apparecchio**

Pulire l'apparecchio con un panno asciutto morbido.

### **Pulizia Bracciale**

Piccole macchie sul bracciale possono essere rimosse con attenzione con un normale detersivo per stoviglie.

### **Disinfezione**

Per la disinfezione (tempo di azione di circa 5 minuti) dell'apparecchio e dell'anello di tenuta si raccomanda di utilizzare il disinfettante antifect liquid (Schülke & Mayr). Per disinfettare il bracciale, si consiglia la disinfezione a spruzzo. Assicurarsi che l'anello di tenuta sia regolarmente pulito e disinfettato, specialmente se l'apparecchio viene utilizzato da più utenti.

## Condizioni di Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti per 3 anni dalla data di acquisto. Preghiamo sempre allegare allo strumento la fattura con la data di acquisto, rilasciata dal punto vendita. La garanzia si applica per difetti di fabbricazione del prodotto. Dopo la riparazione, il periodo di garanzia rimane sempre di 2 anni dalla data di acquisto. L'eventuale estensione di garanzia si applica esclusivamente alle parti sostituite.

Sono esclusi dalle clausole di garanzia le parti soggette a normale usura (es. bracciale), i danni derivanti dal trasporto ed eventuali danni causati da uso improprio (ad esempio, il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso). Danni dovuti a manomissione da parte di persone non autorizzate sono pertanto esclusi dalla garanzia. In questi casi non saranno riconosciute even-

tuali richieste di risarcimento danni nei nostri confronti.

Per la manutenzione durante il periodo di garanzia, il dispositivo deve essere inviato insieme alla fattura a:

BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG,  
Bahnhofstr. 64, D-72417 Jungingen.

boso non si assume alcuna responsabilità per le eventuali perdite che possono verificarsi in seguito all'uso di questo sfigmomanometro, come ad esempio i disturbi d'esercizio o le perdite di dati.

Non si garantisce che questo sfigmomanometro sia in grado di generare una connessione con tutti gli apparecchi compatibili con Bluetooth.

## Servizio clienti

### Servizio clienti

Le prestazioni coperte da garanzia e le riparazioni devono essere effettuate dal personale appositamente addestrato e autorizzato. Non modificare questa apparecchiatura senza l'autorizzazione del costruttore. Inviare l'apparecchio, accuratamente imballato e correttamente affrancato, al proprio rivenditore autorizzato o direttamente a:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG  
Serviceabteilung  
Bahnhofstraße 64, D-72417 Jungingen  
T: +49 (0) 74 77 / 92 75-0

## Smaltimento



L'apparecchio e le batterie non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici.

Al termine della sua durata d'impiego, l'apparecchio deve essere smaltito presso un centro di raccolta del materiale elettronico usato.

Ricordare che le batterie e le batterie ricaricabili devono essere smaltite a parte (centro di raccolta del proprio comune).

Durata dell'apparecchio stimata: 5 anni (Utilizzando lo strumento 6 volte al giorno)

Durata dell'anello di tenuta: 2 anni (Utilizzando lo strumento 6 volte al giorno)

## Specifiche tecniche

---

<b>Metodo di misurazione:</b>	oscillometrico
<b>Ambito di misurazione:</b>	sistolica: 60 – 279 mmHg diastolica: 40 – 200 mmHg Polso: 40 – 180 al minuto
<b>Pressione del bracciale:</b>	0 - 299 mmHg
<b>Capacità di memoria:</b>	30 misurazioni
<b>Schermo:</b>	a cristalli liquidi (LCD)
<b>Condizioni operative:</b>	temperatura ambientale: +10°C - +40°C umidità relativa: 15 - 85%
<b>Condizioni di immagazzinamento:</b>	temperatura ambientale: -20°C - +60°C umidità relativa: 10 - 95%
<b>Alimentazione:</b>	DC 6 V (4 batterie mignon 1,5 V, tipo IEC LR 6, alcaline, al manganese), in alternativa come alimentazione opzionale: alimentatore DC 6 V, n. d'ordine 410-7-150



## Specifiche tecniche

---

<b>Durata tipica delle batterie:</b>	500 cicli di misurazione (a seconda della pressione di gonfiaggio e della frequenza d'uso)
<b>Controllo carica batterie:</b>	simbolo sullo schermo
<b>Peso:</b>	250 g senza batterie
<b>Dimensioni (largh. x alt. x prof.):</b>	96 mm x 68 mm x 130 mm
<b>Classificazione:</b>	classe II (☐)
<b>Parte applicata:</b>	tipo BF (⚡)
<b>Protezione contro oggetti solidi:</b>	IP20
<b>Test clinico:</b>	la precisione di misurazione è conforme ai requisiti della norma ISO 81060 Parte 2

## Specifiche tecniche

---

**Bluetooth**

Bluetooth versione 4.0

**Deviazione massima della misurazione della pressione del bracciale:**

$\pm 3$  mmHg

**Deviazione massima della misurazione delle pulsazioni:**

$\pm 5$  %

**Norme di riferimento:**

DIN EN ISO 80601-2-30 „Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated type non-invasive sphygmomanometers”.

# Istruzioni per il controllo metrologico

## (solo per il personale specializzato addestrato)

Il controllo metrologico deve essere effettuato almeno ogni 2 anni da parte delle seguenti istituzioni o persone:

- produttore
- competente autorità di metrologia
- persone che soddisfano i requisiti delle norme di utilizzo dei prodotti medicali.

### A) Prova di funzionalità

La prova di funzionalità dell'apparecchio può essere effettuata unicamente su persone o con un simulatore idoneo.

### B) Controllo di tenuta del circuito di pressione e deviazioni dell'indicatore di pressione

### Avvertenze

- a) Se la pressione di gonfiaggio in modalità misurazione supera i 299 mmHg, la valvola di scarico rapido dell'aria apre il circuito di pressione. Se la pressione in modalità verifica supera i 320 mmHg, lo schermo lampeggia.
- b) I controlli di calibrazione devono essere effettuati con una speciale spina. Questo test è fornibile a pagamento. Nel circuito di pressione deve essere inoltre inserita una pompa a palloncino.

# Istruzioni per il controllo metrologico

## (solo per il personale specializzato addestrato)

### Procedura di verifica

- 1.) Rimuovere le batterie.
- 2.) Tenere premuto il pulsante Start e inserire le batterie.
- 3.) Rilasciare il pulsante Start.  
L'apparecchio è ora in modalità verifica; nelle aree SIS e DIA viene visualizzata la pressione attuale.
- 4.) Verificare come d'abitudine le deviazioni dell'indicatore di pressione e la tenuta del circuito di pressione (tenendo conto del tempo di assestamento del bracciale, che comporta almeno 30 sec.).

5.) Spegnerne l'apparecchio premendo nuovamente il pulsante Start.

# Índice de contenido

---

Visión global del aparato.....	180
Volumen de suministro.....	181
Guía rápida.....	182
Introducción.....	183
Finalidad de uso.....	184
Valores de la tensión arterial.....	185
Valor sistólico y diastólico de la tensión arterial.....	185
Valores límite de la OMS para la clasificación de la tensión arterial.....	185
Puesta en marcha del tensiómetro.....	187
Colocar las baterías.....	187
Indicador de estado de la batería.....	188
Consejos que debe seguir cuando se tome la tensión.....	189
Indicaciones generales sobre comunicaciones Bluetooth.....	191
Preparativos para tomarse la tensión.....	193
Notas sobre el tamaño del brazalete.....	193
Colocación del brazalete.....	194

# Índice de contenido

Medición de la tensión arterial.....	197
Interrupción de la medición.....	198
Pantalla de valores de medición.....	199
Configurar la aplicación y establecer la conexión.....	201
Medir y transferir la presión arterial.....	205
Evaluar y enviar las mediciones.....	207
Borrar valores de medición.....	209
Conexión a la red eléctrica.....	210
Pantalla de error.....	211
Limpieza y desinfección.....	214
Condiciones de Garantía.....	215
Servicio de atención al cliente / Eliminación.....	216
Datos técnicos.....	217
Instrucciones de comprobación para el control de la técnica de medición (sólo para personal cualificado).....	220

## Visión global del aparato



- Indicador de estado de las baterías consulte la pág. 188
- Medición en curso consulte la pág. 198
- Alteración del ritmo cardíaco durante la medición consulte las páginas 199, 212
- ADVERTENCIA!** Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Para evitar el peligro de asfixia mantenga esta bolsa alejada del alcance de bebés y niños. consulte estuche
- Comunicación Bluetooth activa

ES

# Volumen de suministro

1 tensiómetro de la serie  
**boso medicus system**



4 pilas LR 6 (AA)



1 brazalete universal  
CA 04



1 instrucciones  
de uso



1 estuche



## Guía rápida

- ➔ Inserte las baterías asegurándose de que la polarización es la correcta (pág. 187).
- ➔ Conecte el brazalete con el tensiómetro (pág. 193).
- ➔ Coloque el brazalete (pág. 194).
- ➔ Para iniciar (o interrumpir) una medición pulse el botón de inicio que corresponda (pág. 197).

Los valores de medición correspondientes a la sístole, diástole y el pulso se muestran una vez realizada la medición (pág. 199).



Esta guía rápida no puede sustituir los datos detallados que se incluyen en las instrucciones de uso y que se refieren al manejo y la seguridad de su tensiómetro.



Lea atentamente dichas instrucciones en su totalidad.

## Introducción

Estimado cliente: nos alegramos de que haya decidido adquirir un tensiómetro boso. La marca boso representa un máximo nivel de calidad y precisión y es también el número 1 entre los profesionales. En la actualidad, el 96% de los médicos alemanes utilizan tensiómetros boso. La larga experiencia en el campo profesional se encuentra también en todos los equipos de paciente que se utilizan para tomarse la tensión en casa.

Este aparato se ha sometido a nuestros estrictos controles de calidad y, por lo tanto, es una herramienta segura para controlar sus valores de tensión arterial.



Lea estas instrucciones de uso antes de utilizar el tensiómetro por primera vez, pues la tensión arterial sólo podrá medirse correctamente si el aparato se utiliza

correctamente.

En estas instrucciones de uso el símbolo „➔“ precede a una acción que debe realizar el usuario.

Para obtener ayuda con la puesta en funcionamiento, el uso o el mantenimiento, póngase en contacto con su distribuidor o con el fabricante (datos de contacto en la contraportada de este manual).

El fabricante debe ser informado inmediatamente de cualquier estado de funcionamiento inesperado o incidente que haya empeorado o que haya podido empeorar el estado de salud.

Si vende el aparato, no se olvide de incluir también estas instrucciones de uso.

## Introducción

Si utiliza este aparato en el campo de la terapéutica (según el reglamento alemán sobre el uso de productos sanitarios), realice los controles propios de la técnica de medición a los intervalos que correspondan (véase página 220).

Dispositivos de comunicación inalámbricos, como teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y sus estaciones base, walkie-talkies y los dispositivos de redes inalámbricas domésticas pueden afectar a este monitor de presión arterial. Por lo tanto, debe mantenerse una distancia mínima de 3,3 metros con estos dispositivos. Durante la medición de la tensión arterial no hablar a través de un teléfono móvil.

Este aparato cumple la Directiva europea de productos medicinales 93/42(CEE

Esto se confirma a través de la identificación CE 0124.

(El número de referencia 0124 corresponde a la institución nombrada DEKRA)

La transmisión radioeléctrica Bluetooth del aparato corresponde a la Directiva de telecomunicaciones 1999/5/CE.

## Finalidad de uso

Medición no invasiva de la tensión arterial sistólica y diastólica y la frecuencia del pulso en seres humanos.

El dispositivo puede utilizarse con cualquier perímetro de brazo según lo indicado en el manguito correspondiente.

## Valores de la tensión arterial

Para determinar correctamente el valor de la tensión arterial, deben medirse **dos valores**:

● **Valor sistólico (superior) de la presión arterial:**

Se produce cuando el músculo del corazón se contrae e impulsa la sangre hacia los vasos sanguíneos.

● **Valor diastólico (inferior) de la tensión arterial:**

Se produce durante la dilatación del músculo del corazón, lo que permite que éste vuelva a llenarse de sangre.

Los valores de la presión sanguínea se expresan en mmHg (mm de columna de mercurio).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido los siguientes parámetros como guía para clasificar la tensión arterial.

	sistólica	diastólica
Alta (hipertensión)	a partir de 140 mmHg	a partir de 90 mmHg
Normal-Alta	130 a 139 mmHg	85 a 89 mmHg
Normal	120 a 129 mmHg	80 a 84 mmHg
Óptima	hasta 119 mmHg	hasta 79 mmHg

## Valores de la tensión arterial

---

La necesidad de un tratamiento médico no sólo depende de los indicadores de la tensión, sino también del perfil de riesgo de cada paciente. Consulte a su médico si cualquiera de los valores (sistólico diastólico) de su tensión arterial se encuentra siempre claramente por encima del límite.

Cuando uno se toma la tensión en casa, los valores suelen ser más reducidos que

en la consulta del médico. Por esta razón, la Asociación Alemana contra la Hipertensión ha establecido límites más bajos para la medición en casa:

Medición en casa:	135/85 mmHg
Medición en la consulta:	140/90 mmHg

## Puesta en marcha del tensiómetro

El dispositivo debe ser instalado y puesta en funcionamiento de acuerdo a la información de este manual.

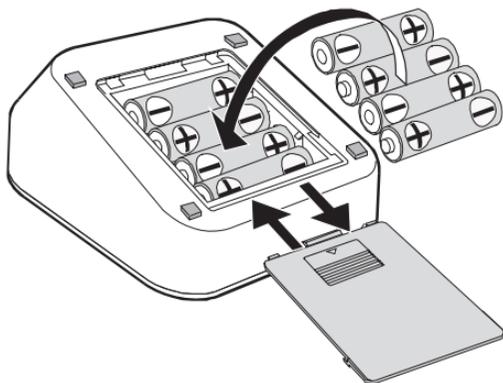


Figura 1

➔ Utilice exclusivamente las pilas recomendadas, de alta calidad y a prueba de pérdidas (véase apartado "Datos Técnicos", en la página 217).

**⚠** **Nunca** utilice pilas usadas con pilas nuevas o de diferentes fabricantes.

**⚠** Si coloca mal las pilas, el aparato no funcionará, lo que puede provocar la generación de calor, hacer que se derramen las baterías u ocasionar daños en el tensiómetro.

### ➔ Colocación de las pilas

El compartimiento de las pilas está situado en la parte inferior del aparato. Coloque las pilas en su compartimento tal y como se muestra en la figura 1.

➔ Si no piensa utilizar el aparato durante un largo período de tiempo, retire las pilas.

## Puesta en marcha del tensiómetro

El tensiómetro posee una pantalla de estado que muestra el nivel de carga de la batería (véase página 180).

-  Las pilas están llenas.
-  Las pilas parcialmente descargadas.
-  Las pilas deberán cambiarse dentro de poco.
-  Símbolo intermitente. No es posible efectuar ninguna medición más. Cambie las pilas de inmediato.

### **Cuide el medio ambiente.**

Las pilas usadas y los aparatos de recarga no se pueden eliminar con la basura doméstica.

Hay que depositarlos en contenedores especiales y centros de recogida de pilas usadas o residuos especiales. Consulte con su ayuntamiento para conocer las normas de su localidad.

## Consejos que debe seguir cuando se tome la tensión

1. Las diferencias en los valores de la tensión arterial son normales. Los resultados pueden ser muy diferentes incluso cuando se realiza más de una medición consecutiva. Una medición aislada, o la realización de mediciones a intervalos irregulares, no ofrecen ninguna conclusión fiable sobre el valor real de la tensión arterial. Para tener una idea exacta y fiable del estado de la tensión, es necesario tomársela a intervalos de tiempo periódicos y en condiciones similares; los resultados se anotarán después en la ficha de control de la tensión arterial.
2.  Tomarse la tensión personalmente no significa que uno pueda automedicarse. No cambie nunca las dosis de la medicación que le ha recetado su médico sin consultarle.
3. Las alteraciones en el ritmo cardíaco pueden afectar a la precisión de medición del tensiómetro o incluso provocar valores de medición incorrectas (véase página 212).
4. En los pacientes con un pulso débil (lo que puede suceder, por ejemplo, en los pacientes que llevan un marcapasos) también pueden producirse mediciones incorrectas. El tensiómetro no afecta en modo alguno al buen funcionamiento del marcapasos.
5. Si usted está embarazada, consulte a su médico antes de utilizar el tensiómetro.

## Consejos que debe seguir cuando se tome la tensión

---

6. Tómese la tensión siempre cuando esté tranquilo y relajado.

Se recomienda hacerlo dos veces al día, a saber, por la mañana y por la noche, antes de acostarse, cuando ya se haya olvidado del estrés del trabajo.

7. La tensión arterial (cuando no existen limitaciones, véase pág. 195) debe tomarse siempre en el brazo con los valores de tensión más altos.

Así pues, mida primero la tensión arterial en los dos brazos y, a partir de ese momento, hágalo siempre en el brazo en el que haya obtenido la medición más alta.

## Indicaciones generales sobre comunicaciones Bluetooth

-  El aparato para medición de la tensión arterial no pueden ser empleado en lugares en los que la comunicación inalámbrica está prohibida como p.ej. en aviones y hospitales.  
Este aparato para medición de la tensión arterial puede tener efectos negativos sobre aparatos electrónicos o aparatos eléctricos medicinales.
- La distancia máxima de comunicaciones entre el aparato para medición de la tensión arterial y el receptor es de aprox. 10 Meter. Esta distancia puede reducirse en función del entorno; compruebe por ello si la distancia para la transmisión de datos tras la medición es lo suficientemente reducida.
- Cuidado de que el ambiente entre el aparato para medición de la tensión arterial y el dispositivo móvil no esté obstruido. La distancia de comunicación puede haberse acortado debido a la ejecución de construcción del edificio u otros obstáculos. Especialmente bajo ciertas circunstancias no es posible una comunicación a través de paredes de hormigón armado etc.
- Durante el enlace todos los otros aparatos Bluetooth que se encuentran en el radio de alcance deben estar desactivados.
- En caso de que se presente alguna situación improbable que este aparato para medición de la tensión arterial interfiera

## Indicaciones generales sobre comunicaciones Bluetooth

---

en aparatos de comunicación inalámbrica, utilice el aparato para medición de la tensión arterial en otro emplazamiento.

- No emplee la comunicación Bluetooth en las cercanías de un dispositivo IEEE802.11g/b/n-WLAN u otras instalaciones de comunicación inalámbrica (especialmente en el rango de 2,4 GHz) o bien en las cercanías de aparatos que emitan ondas electromagnéticas (como p.ej. aparatos de microondas) Esto puede conducir a que la comunicación se interrumpa frecuentemente, la velocidad de comunicación se reduzca notablemente y se presenten errores.

## Preparativos para tomarse la tensión

### Nota sobre el tamaño del brazalete:

**⚠** Este aparato puede utilizarse exclusivamente con los tipos de brazalete que se indican a continuación, y que deben seleccionarse en función del contorno del antebrazo del paciente.

Tipo	Contorno del antebrazo	Número de referencia
CA01	22 – 32 cm	143-4-764
CA02	32 – 48 cm	143-4-757
CA04	22 – 42 cm	143-4-765*

\* Éste es el tamaño universal que se incluye en el volumen de suministro estándar.

Conecte el brazalete al tensiómetro introduciendo con el conector (hasta oír un clic) en la entrada situada en el lado izquierdo del tensiómetro (véase figura 2).

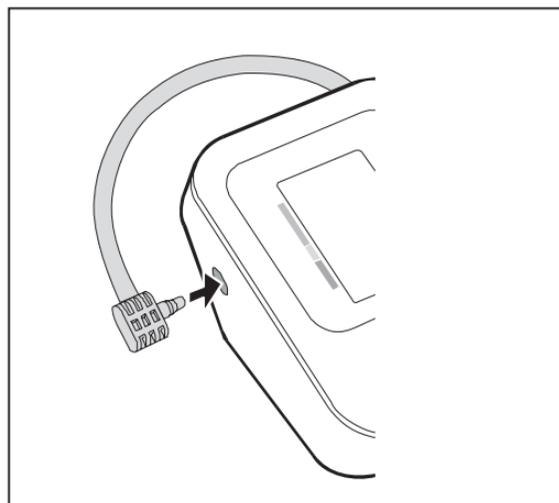


Figura 2

# Preparativos para tomarse la tensión

## Factores que deben tenerse en cuenta al tomarse la tensión



Evite tomar café o fumar una hora antes de tomarse la tensión.



Siéntese cómodamente para proceder a la medición, manteniendo apoyados la espalda y los brazos. No cruce las piernas y apoye los pies directamente en el suelo. Relájese durante 5 minutos y, después, tómese la tensión. No se mueva mientras el tensiómetro esté tomando los valores.

## Ajuste del brazalete

La medición debe realizarse sobre el antebrazo desnudo.



Asegúrese de que no se impida la libre circulación de la sangre en el brazo como consecuencia de haber levantado la manga para descubrir el antebrazo y, en caso necesario, retire por completo la prenda de vestir antes de realizar la medición.

- ➔ Mueva el brazalete abierto en forma de anillos por el antebrazo hasta que el borde inferior se encuentre aprox. a 2o 3 cm por encima de la parte interior de la articulación del codo. Además, el brazalete debe colocarse de tal modo que la marca se encuentre sobre la arteria (véase figura 3).

## Preparativos para tomarse la tensión

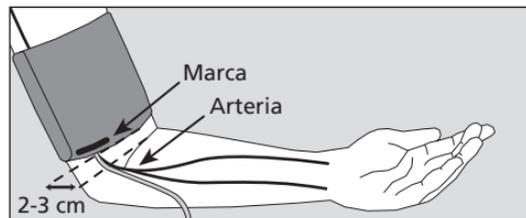


Figura 3

- ⚠ No coloque el brazalete sobre una herida, pues esto puede empeorar aún más la lesión.
- ⚠ No coloque el brazalete en un brazo cuyas arterias o venas se encuentren bajo tratamiento médico (por ejemplo, shunt o derivación).
- ⚠ En el caso de las mujeres a las que se les haya amputado una mama, no coloque el brazalete en el brazo correspondiente al lado amputado.

⚠ Durante la medición pueden producirse errores en otros aparatos médicos que se utilicen al mismo tiempo en el mismo brazo.

⚠ El brazalete no debe estar muy ajustado; tiene que quedar espacio suficiente para introducir dos dedos entre brazalete y brazo.

⚠ El anillo metálico **no debe** quedar nunca sobre la arteria (véase figura 3), puesto que esto falsearía el resultado de los valores de medición.

➔ Tire del extremo del brazalete que se ha introducido por el anillo metálico y rodee el antebrazo enrollando hacia afuera. Cierre con el velcro ejerciendo una ligera presión.

## Preparativos para tomarse la tensión

- ➔ Apoye el brazo ligeramente doblado y con el brazalete ya colocado sobre una mesa, de manera que el brazalete quede a la altura del corazón y el brazo esté relajado.

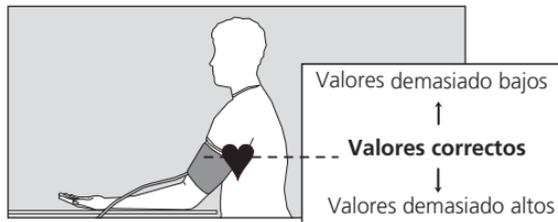


Figura 4



No hable mientras el tensiómetro esté tomando los valores.

**⚠** Asegúrese de que el tubo de aire no se doble mientras se infla durante la medición, pues esto podría provocar la formación de coágulos de sangre y, en consecuencia, ocasionarle una lesión.

**⚠** No interrumpa la circulación de la sangre durante un tiempo innecesariamente largo (más de dos minutos) para efectuar una medición. Si el tensiómetro presenta un error de funcionamiento, retire el brazalete del brazo.

**⚠** Si se toma la tensión con demasiada frecuencia, la circulación sanguínea puede verse afectada, lo que puede provocar lesiones.

## Medición de la tensión arterial

➔ Inicie la medición con el botón de inicio



⚠ Ahora permanezca totalmente inmóvil y en silencio.

A efectos de prueba de funcionamiento aparecen brevemente todos los elementos indicadores de la pantalla LCD (véase figura 5).

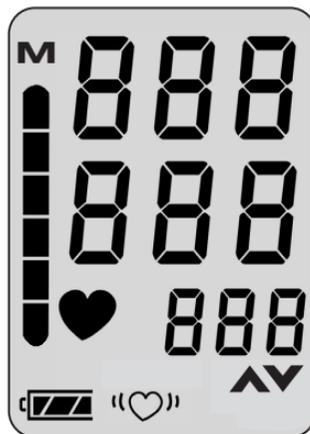


Figura 5

## Medición de la tensión arterial

La bomba empieza a inflar el brazalete.

El tensiómetro incorpora un sistema inteligente de inflado que garantiza que el brazalete se infla hasta una presión adecuada que no resulte agresiva para el brazo. El incremento de la presión del manguito se indica como valor numérico digital y en forma de barras en el borde izquierdo del display.

Una vez alcanzada la **presión necesaria** la bomba se desconecta y el brazalete empieza a desinflarse.

### Interrupción de la medición:

Si desea interrumpir la toma de la tensión, puede hacerlo en cualquier momento pulsando el botón de inicio mientras la medi-

ción esté en curso. En este caso, el brazalete se desinflará de forma automática.

Durante la fase de medición en la pantalla aparece el progreso en la reducción de la presión del brazalete, junto con el símbolo ♥ (véase fig. 6).



Figura 6

## Pantalla de valores de medición

Una vez tomada la tensión, la válvula magnética interna se abre automáticamente para permitir el desinflado rápido del brazalete.

Los valores de tensión arterial medidos (sístole, diástole, pulso) aparecen en la pantalla (véase figura 7).



Figura 7

Si después de la medición aparece el símbolo "♥", se recomienda volver a tomar la tensión, pero esta vez manteniendo el brazo completamente inmóvil. Si vuelve a aparecer este símbolo "♥" en la pantalla después de volver a tomar la tensión con el brazo inmóvil, puede que exista una alteración del ritmo cardíaco. Consúltelo con su médico en la próxima visita.

La tensión arterial es una magnitud dinámica que puede verse afectada por diversos factores, como la posición del paciente (no es lo mismo si está sentado, de pie, tumbado o en movimiento), o por las condiciones físicas o anímicas presentes en el momento de realizar la medición (estrés, presencia de una enfermedad, etc.).

➔ So observa que el resultado es claramente incorrecto, repita el proceso.

## Pantalla de valores de medición

---

El tensiómetro se desconecta automáticamente después de aprox. 1 minuto. Para repetir la medición vuelva a pulsar **brevemente** el botón de inicio que corresponda.



Espera al menos dos minutos entre cada medición.

- ➔ Si no desea volver a tomar la tensión, retire el brazalete del brazo.

## Configurar la aplicación y establecer la conexión



Requiere interacción con boso-App



Requiere interacción con boso medicus system

Para permitir el intercambio de datos entre el tensiómetro y su dispositivo móvil, se deben tener en cuenta los pasos siguientes:



– Asegúrese de que esté activado Bluetooth en su dispositivo móvil. (Se requiere Bluetooth 4.0)

– Descárguese la aplicación de boso del Google/Apple Store.



Durante la instalación de la aplicación, el sistema solicitará permiso para acceder a la ubicación actual. Responda con "SÍ" para evitar errores en la conexión Bluetooth.

# Configurar la aplicación y establecer la conexión



- Inicie la aplicación de boso en su dispositivo móvil.
- Cree un nuevo usuario:
  1. Seleccione "Usuario" en el menú principal.
  2. Seleccione "+ Nuevo" en la barra de menú inferior.
  3. Introduzca sus datos personales. Los campos obligatorios están identificados con "\*".
  4. Guarde sus entradas con el botón "Guardar" de la barra de menú inferior.
- Seleccione mediante una marca de verificación el usuario, para el cual se deben guardar los valores de medición.



## Configurar la aplicación y establecer la conexión



- Vuelva al menú principal con el botón "Atrás" de la barra de menú superior.
- Abra el menú principal "Dispositivos"



- Pulse y mantenga pulsado el botón de inicio "START" del tensiómetro, hasta que en la pantalla aparezca "Pr". Durante aprox. un minuto se muestra en la pantalla la indicación de comunicación.



- En el menú "Dispositivos", seleccione "Añadir nuevo dispositivo" en la barra de menú inferior.



En iOS se debe confirmar además la consulta de acoplamiento con "Acoplar".



- El dispositivo móvil sincronizará automáticamente la fecha y la hora.



- Tras un exitoso enlace aparece "End" en el display del dispositivo y este se indica en la lista de dispositivos de la aplicación.

Ahora ha finalizado la configuración. Salga del menú con el botón "Atrás" de la barra de menú superior.

## Configurar la aplicación y establecer la conexión

**Tras un cambio de batería**, el tensiómetro se debe volver a acoplar con el dispositivo móvil, ya que se borrará la hora debido al cambio de la batería.

Si no se realiza un nuevo acoplamiento, durante la transmisión de datos se almacenará la hora del sistema actual del dispositivo móvil como marca de hora para los valores de medición.

Proceda de la forma siguiente:

- Borre el tensiómetro de la lista de dispositivos de la aplicación
- Borre los ajustes de Bluetooth del dispositivo móvil
- Realice el nuevo acoplamiento de la forma descrita.

## Medir y transferir la presión arterial

Aplique el manguito y realice una medición de la presión arterial como se describe en las instrucciones de uso.



Mientras esté activo Bluetooth y abierta la aplicación, los valores medidos se transferirán automáticamente una vez haya finalizado la medición.



Después de una transferencia correcta, el valor de medición se borrará de la memoria de valores de medición del tensiómetro.



Si no se han transferido los datos de medición, vuelva a ejecutar el acoplamiento. Si la aplicación o la

conexión Bluetooth está inactiva, se almacenarán automáticamente un máximo de 30 valores de medición en el tensiómetro (Si la memoria de valores de medición está llena (30 mediciones), se borrará la medición más antigua y se guardará la actual; no se guardan las mediciones incorrectas) y se transferirán después de la próxima medición, cuando se haya activado la aplicación.

Para transferir a la aplicación todos los valores de medición almacenados en la memoria de valores de medición del medicus system, debe estar activada en el menú "Configuración" la transferencia de to-

# Medir y transferir la presión arterial

dos los valores de medición (ajuste predeterminado). Si selecciona aquí "último", se transferirá solo el último valor de medición medido y se borrarán todos los valores de medición almacenados.

En este menú también se pueden modificar las horas para la evaluación de la mañana/tarde.

Guarde sus ajustes con el botón "Guardar" de la barra de menú inferior.

"bosogramm system" está prevista para una báscula.

← Zurück      Einstellungen      boso

**Allgemeine Einstellungen**

Beginn Vormittag Auswertung      00:00

Beginn Nachmittag Auswertung      12:00

**bosomedic system**

Messwertübernahme      letzter      **alle**

**bosogramm system**

Modus      singleuser      **multiuser**

↶      ↷

Abbrechen      Speichern

# Evaluar y enviar las mediciones




En el menú "Valores de medición" se muestran todos los valores de medición transmitidos hasta el momento.

A través del botón "Gráficos" de la barra de menú inferior podrá acceder a la representación gráfica de los valores de medición.

Seleccione los gráficos disponibles "SYS/ DIA", "PULSO" a través de los botóns de la sección superior de la imagen. Toque el gráfico para ampliarlo o reducirlo.

La opción "kg/IMC" está prevista para una báscula.

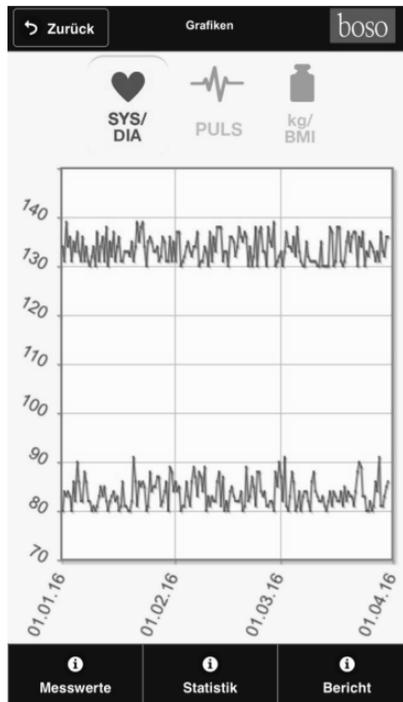

## Evaluar y enviar las mediciones



A través del botón "estadística" de la barra de menú inferior accederá al resumen estadístico de los valores de medición. Se puede seleccionar el intervalo temporal del resumen (fecha desde/hasta).

A través del botón "Informe" de la barra de menú inferior accederá al menú de envío de los valores de medición; en este podrá enviar el resumen por correo electrónico en formato PDF o XML.

El archivo XML se puede leer en el programa de PC "boso profil-manager XD Home".

Este programa ofrece posibilidades de evaluación adicionales y está disponible gratuitamente en Internet

(<http://www.boso.de/download/profilmanagerXDHome/>).

The screenshot shows a mobile application interface for sending reports. At the top, there is a dark header bar with a back arrow and the text "Zurück" on the left, "Bericht" in the center, and the "boso" logo on the right. Below the header, there are two input fields for email addresses, each with a magnifying glass icon and the label "An:" above the first and "Kopie:" above the second. Below these fields is a section labeled "Email Text:" with a large, empty text area for composing the message. At the bottom of the screen, there are two dark buttons with white text and envelope icons: "Als XML senden" on the left and "Als PDF senden" on the right.

# Borrar valores de medición



En el menú "Valores de medición" se pueden borrar con el botón "Borrar" de la barra de menú inferior valores de medición individuales o valores de medición más antiguos que 1/3/6/12 meses.

Atención, los datos se borrarán de forma irrecuperable. Realice a tiempo un archivado de datos, creando con el símbolo "Informe" un archivo XML o PDF.

	SYS	DIA	PUL	Arr	kg	
30.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,7	<input checked="" type="checkbox"/>
30.03.2016 18:00:00	136	86	66	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,5	<input type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	136	85	68	-	-	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,8	<input checked="" type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	132	83	67	-	-	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,7	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	133	81	65	-	-	<input type="checkbox"/>
28.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,9	<input type="checkbox"/>

## Conexión a la red eléctrica

---

En la parte posterior del aparato se encuentra el conector hembra para el adaptador de alimentación. En caso necesario, utilice únicamente el adaptador de alimentación boso (**nº ref. 410-7-150**). Este adaptador de alimentación se ha ajustado, estabilizado y polarizado de forma precisa para la tensión del aparato. Esto significa que los adaptadores de otros fabricantes pueden provocar un daño en el sistema electrónico, lo que a su vez anulará la garantía. Además, los adaptadores de alimentación de otros fabricantes pueden desencadenar un incendio.

## Pantalla de error

Si durante la toma de la tensión se produce algún problema que impida el correcto funcionamiento del aparato, en la pantalla aparece un error en lugar de los resultados de la medición.

Significado de los mensajes de error:

Causa del error del indicador <b>Err</b> :	Solución del error:
 La presión del brazalete presenta fuertes oscilaciones durante la medición	Mantenga el brazo quieto
No se puede evaluar el pulso	Revise la posición del brazalete (véase pág. 193) y vuelva a realizar la medición.
La diferencia entre la sístole y la diástole es demasiado reducida Sístole – Diástole $\leq 10$ mmHg	Revise la posición del brazalete (véase pág. 193) y vuelva a realizar la medición.
 Errore di gonfiaggio	Il bracciale potrebbe essere troppo largo; stringere il bracciale (vedere pag. 193)

## Pantalla de error

Causa del error del indicador <b>Err:</b> Resolución del problema	
	<p>El valor del pulso no se puede determinar correctamente</p> <p>Compruebe la posición del manguito y repetir la medición.</p>
 	<p>Error interno</p> <p>Retire las pilas y pulse brevemente el botón START. Ponga las pilas de nuevo en el monitor. Si el error persiste, enviar el aparato al fabricante para su reparación.</p>
	<p>“♥” Indicador</p> <p>Solución del error:</p> <p>Repita la toma de la tensión manteniendo el brazo inmóvil. Si vuelve a aparecer este símbolo“♥” en la pantalla después de volver a tomar la tensión con el brazo inmóvil, puede que exista una alteración del ritmo cardíaco. Consúltelo con su médico en la próxima visita.</p>

## Pantalla de error

### Causa del error del indicador **Err**: Risoluzione del problema



Error en la comunicación Bluetooth

Retire las pilas y pulse brevemente el botón START. Ponga las pilas de nuevo en el monitor. Realice un nuevo enlace. Si el error persiste, enviar el aparato al fabricante para su reparación.



Durante la instalación de la aplicación, el sistema solicitará permiso para acceder a la ubicación actual. Responda con "Sí" para evitar errores en la conexión Bluetooth.

## Limpieza y desinfección

---

### **Limpieza Tensiómetro:**

Utilice exclusivamente un paño suave y seco para limpiar este aparato.

### **Limpieza Brazaletes:**

Las manchas no muy intensas pueden eliminarse con un detergente para lavavajillas estándar.

### **Desinfección:**

Para la desinfección por fregado (tiempo de aplicación de al menos 5 minutos) del dispositivo y el manguito, recomendamos el producto desinfectante antifect liquid (Schülke & Mayr). Para desinfectar el manguito, se recomienda desinfección por pulverización.

Especialmente si el dispositivo se usa en varios usuarios, el manguito deberá limpiarse y desinfectarse regularmente.

## Condiciones de Garantía

Damos una garantía de 3 años desde la fecha de compra. La fecha de la compra se tiene que poder comprobar con la factura de venta. Dentro del período de garantía contra defectos de fabricación, se arreglarán estos de forma gratuita. La reparación no prolonga el periodo de garantía, sólo en el componente reemplazado.

Quedan excluidas de la garantía las partes sujetas a desgaste normal (por ejemplo, manguito), daños por transporte y daños causados por un manejo inadecuado (por ejemplo, el incumplimiento de las instrucciones de uso). Los daños debidos a desmontajes realizados por personas no autorizadas están excluidos de la garantía. No hay reclamaciones por daños y perjuicios contra nosotros están justificadas por la garantía.

En el caso de reclamaciones de garantía justificado el dispositivo tiene que ser enviado con la factura original a:

BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG,  
Bahnhofstr. 64, D-72417 Jungingen.

boso no asume ninguna responsabilidad por pérdidas generadas como p.ej. anomalías de servicio o pérdida de datos que puedan presentarse con el empleo de este aparato para medición de la tensión arterial.

No se garantiza que este aparato para medición de la tensión arterial pueda establecer una comunicación con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

## Servicio de atención al cliente Eliminación

### Servicio de atención al cliente:

Los trabajos de reparación y los que se realicen dentro del período de garantía deben correr a cargo de personal debidamente formado y autorizado. No modifique este equipo sin la autorización del fabricante. Envíe el tensiómetro bien embalado y correctamente franqueado a su distribuidor, o bien directamente a:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG  
Serviceabteilung  
Bahnhofstraße 64, D-72417 Jungingen  
T: +49 (0) 74 77 / 92 75-0



Ni el tensiómetro ni las pilas pueden eliminarse con la basura doméstica.

Al final de la vida útil del tensiómetro, éste debe llevarse a un punto de recogida destinado a equipos electrónicos usados.

Recuerde que las pilas y las baterías recargables deben eliminarse por separado (en el centro de recogida de su localidad).

Vida útil estimada del dispositivo: 5 años (Usando la unidad 6 veces al día).

Vida útil esperada del manguito: 22 años (Usando la unidad 6 veces al día).

## Datos técnicos

---

<b>Principio de medición:</b>	Oscilométrico
<b>Intervalo de medición:</b>	sistólica: 60 a 279 mmHg diastólica: 40 a 200 mmHg Pulso: 40 a 180 por minuto
<b>Presión del brazalete:</b>	0 a 299 mmHg
<b>Número de memorias:</b>	30 mediciones cada una
<b>Pantalla:</b>	LCD
<b>Condiciones de funcionamiento:</b>	Temperatura ambiente: +10°C a +40°C Humedad relativa del aire 15 – 85 %
<b>Condiciones de almacenamiento:</b>	Temperatura ambiente entre -20°C y +60°C Humedad relativa del aire 10 – 95 %
<b>Tensión de alimentación:</b>	6V CC (4 pilas x 1,5 MI IEC LR6, manganeso alcalino) alternativamente como equipamiento especial: adaptador de alimentación 6V CC; n° ref. 410-7-150

## Datos técnicos

---

<b>Duración habitual de la batería:</b>	500 ciclos de medición (dependiendo del nivel de inflado y la frecuencia de uso)
<b>Indicador de estado de las pilas:</b>	Indicador en la pantalla LCD.
<b>Peso:</b>	250 g sin las pilas
<b>Dimensiones (an x al x pr):</b>	96 mm x 68 mm x 130 mm
<b>Clasificación:</b>	Clase de protección II (□)
<b>Parte aplicada:</b>	tipo BF (⚠)
<b>Protección contra objetos sólidos:</b>	IP20
<b>Ensayo clínico:</b>	la precisión de medición corresponde a los requisitos de la norma ISO 81060 Parte 2.

## Datos técnicos

---

<b>Bluetooth</b>	Bluetooth Versión 4.0
<b>Desviación máxima de medición del brazalete:</b>	$\pm 3$ mmHg
<b>Desviación máxima de la medición del pulso:</b>	$\pm 5$ %
<b>Normas aplicables:</b>	DIN EN ISO 80601-2-30 „Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated type non-invasive sphygmomanometers“ .

# Instrucciones de comprobación para el control de la técnica de medición (sólo para personal cualificado)

El control de la técnica de medición debe realizarse como muy tarde cada dos años y correr a cargo de las siguientes personas:

- fabricante
- autoridades responsables de la metrología
- Personas que cumplan los requisitos del reglamento alemán sobre uso de productos sanitarios.

## A) Verificación del funcionamiento

La prueba de funcionamiento sólo se puede realizar en una persona o con un simulador adecuado.

## B) Verificación de la estanqueidad del circuito de presión y divergencia del indicador de presión

### Notas:

- a) Si la presión aumenta por encima de los 299 mmHg en el modo de medición, la válvula de desinflado rápido se activa y abre el circuito de presión. Si la presión aumenta por encima de los 320 mmHg en el modo de comprobación, la pantalla de valores medición parpadea.
- b) Los controles de calibración, deben hacerse con un enchufe especial. Esta prueba puede hacerse previo pago. Por último, ajuste la pera de acuerdo con el circuito de presión.

# Instrucciones de comprobación para el control de la técnica de medición (sólo para personal cualificado)

## Verificación

- 1.) Extraiga las pilas.
- 2.) Mantenga pulsado el botón de inicio y coloque las baterías.
- 3.) Suelte el botón de inicio.  
El tensiómetro se encuentra ahora en el modo de comprobación. En los campos SYS y DIA se muestra la presión actual.
- 4.) Siga el método habitual para comprobar si hay divergencias en el indicador de presión y si el circuito de presión es estanco (establezca un tiempo para el brazalet de por lo menos 30 segundos).

- 5.) Apague el aparato volviendo a pulsar el botón de inicio.





CE 0124



**BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG**  
**Bahnhofstraße 64**  
**D-72417 Jungingen**

**T + 49 (0) 74 77 92 75-0**  
**F + 49 (0) 74 77 10 21**  
**E zentrale@boso.de**

**Internet: [www.boso.de](http://www.boso.de)**